


**Здоровье
зубов?
Я готов!**

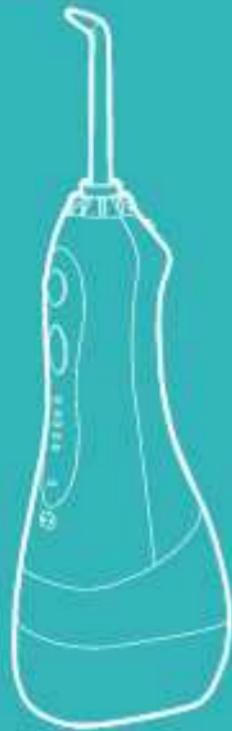

**Ирригатор
для полости рта
КТ-2920**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Китfort:

8-800-775-56-87
(по-прежнему с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам.

Содержание


Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство агрегата	6
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание агрегата	12
Уход и хранение	12
Устранение неисправок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	16
Другие товары Karcher	18

Общие сведения

Ирригатор — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для полоскания зубов) в резервуар, изберите подходящий вам режим и начинайте очистку.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в кирпичи десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флюссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Так же зубной шнуром можно механически инфильтрат десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флюссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и вылет из межзубного пространства и здесенных кирпичей. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболеваний десен. Ирригатор считается самым гигиеническим вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для тех людей, которые имеют брекеты, и людям с протезами или коронками.

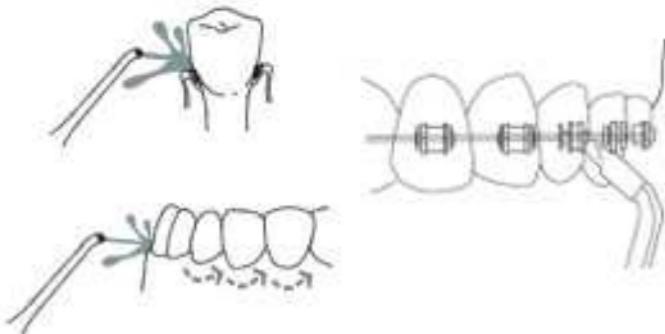

Модель Kitfort KT-2920 является портативным ирригатором, его можно брать с собой в путешествия или на работу — он с легкостью помещается в небольшой сумке. Сам ирригатор вы можете положить в специальную сумку на замочек, она идет в комплекте.

У ирригатора 2 кнопки — кнопка включения/выключения и кнопка выбора режимов. У прибора всего 5 режимов работы, вы можете выбрать от самого слабого до самого сильного. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима, т.к. некодаптационные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете переходить на более сильные режимы.

Ирригатор для полости рта КТ-2920

При работе на корпусе ирригатора светится индикатор выбранного режима. Когда аккумулятор садится, то мигает индикатор заряда батареи.

Прибор автоматически отключается после 2 минут эксплуатации.

В комплекте к ирригатору идут насадки: две классические струйные насадки, насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны, насадка с щеточкой для удаления налета, насадка для чистки языка. На насадках есть цветные пластиновые части, чтобы насадки нельзя было перепутать.

Зарядить прибор с помощью USB-шнурка можно от компьютера или через сетевой адаптер, который шнуромка оказывается у вас дома.

С профилактическими целями ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой тщательную гигиену полости рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш личный врачи-стоматолог, обычно уход включает в себя: ирригацию, чистку зубов тщательной щеткой и щипцами, полоскание рта антисептиками и использование зубной нити, если это необходимо. Этот прибор рекомендуют стоматологи во всем мире.

Комплектация

1. Ирригатор:

- Струйная насадка — 2 шт.
- Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт.
- Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт.
- Насадка для чистки языка — 1 шт.
- Резервуар для воды — 1 шт.
- USB-шнур с нестандартным разъемом — 1 шт.
- Силиконовые запуски — 1 шт.

2. Сумочка — 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*износостойкий



Устройство ирригатора



USB-шнур
с кабинетом
рассыпкой



Насадка
для чистки
зубов



Насадка с
наклонной
для удаления
плаки



Насадка для
удаления
зубок и
заноз
из-под
зубов



Вторая
струйная
насадка

Подготовка к работе и использование

Первое первым использованием налейте воду в резервуар и отверстие для заливания воды, закройте отверстие крышкой, потрясите. После этого переключите ирригатор, откройте крышку отверстия и смыте воду. Ницца помойте этой с мылом.

Зарядка ирригатора

- 1) Откройте специальную заглушку из корпуса ирригатора.
- 2) Вставьте и гнездо на корпусе разъем USB-шнура, другой конец шнура подключите в USB-разъем выключенного электронного устройства, например, компьютера. Если у вас есть и наличия сетевой адаптер (или шнурбэнк), то другой конец шнура вставьте в сетевой адаптер, а сам адаптер подключите к сети.


Во время подзарядки будет мигать синий индикатор зарядки. Когда устройство полностью зарядится, индикатор начнет гореть непрерывно синим. Время полной зарядки составляет 3–5 часов.

Внимание! Во время зарядки пользоваться ирригатором невозможно.

Перед первым использованием зарядите устройство 3–5 часов.

Если ирригатором планируют не пользоваться в течение длительного времени, зарядите его перед тем, как убрать за хранение.


Для увеличения срока службы батарен заряжайте прибор вовремя, а также не оставляйте ирригатор разряженным на длительное время. Если вы оставите ирригатор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога, и электрическая схема заблокирует батарею. В этом случае попробуйте зарядить ирригатор в течение 16 часов.

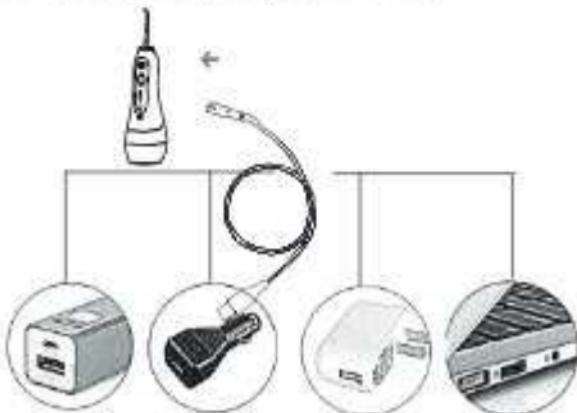

Kitfort

Как налить воду

Откройте крышку резервуара, наклоните корпус горизонтально. Налейте воду в отверстие для заполнения.

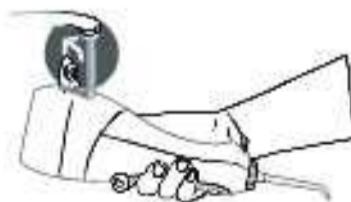

Используйте кипяченую воду или специальный раствор для полоскания рта. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °C.


Как открыть крышку резервуара

Открывайте крышку резервуара аккуратно, строго вверх. Не раскачивайте ее из стороны в сторону, иначе крепления крышки могут сломаться.

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи. На насадках есть специальные щетинные пластиничные части, чтобы можно было различить их друг от друга.

Вставьте насадку в отверстие до щелчка. Отверстие расположено в верхней части корпуса. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх.

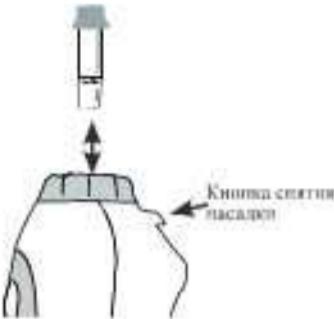

Использование

- Поменяйте наконечник струйной насадки, чтобы отрегулировать направление потока воды. Установленная насадка крутится на 360°.
- Включите ирригатор кнопкой «Вкл/Выкл». Установите необходимый вам режим работы кнопкой «Режим».
Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите самый слабый режим, он находится рядом с «—». Иные чувствительные и неизготовленные детали могут быть травмированы резким и сильным потоком воды.
- Перед тем как нажать на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, наклоните его под углом 45° и направьте струйный пистолетчик себе в рот.
- Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте, нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке, а именно двигайтесь от нейтральных тубусов к передним, направляя насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивание было меньше, включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту.
- Когда засыпки закончатся, выключите ирригатор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Аккуратно откройте крышку резервуара. Переверните ирригатор и слейте оставшуюся воду. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для полоскания, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого излейте в резервуар воду, выключите ирригатор, направляя сам прибор в щелку крана и раковину.

Примечание. Если ирригатор не выключить, то через 2 минуты прибор отключится автоматически.


- Отсоедините резервуар, если вы планируете долго не использовать прибор. Для этого потяните резервуар вправо, а корпус вверх и в сторону, как на картинке. В первый раз придется приложить усилие, чтобы снять резервуар. Снимите резервуар, откройте крышку, вытащите насадку, нажав на кнопку снятая насадки, просушите все части прибора и уберите их на хранение.

Примечание. Крышку отверстия для заливки воды лучше открывать после каждого использования для того, чтобы остатки воды не испарялись. Если крышку не открывать и прибором не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «запахнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застаившейся воды.




Краткое описание насадок
Классическая струйная насадка

С помощью данной насадки можно очистить труднодоступные места во рту. Остатки пищи, которые глубоко вгibtываются в зубные или межзубовые пристройства с легкостью вымываются потоком воды или специального раствора.

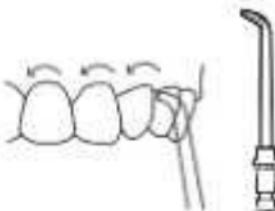

Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны


Зубной камень — это полностью или частично минерализованный мягкий микробный зубной налет, который не был удален во время чистки зубов. В полости рта происходит постоянное размножение микроплоры (особенно после еды), что приводит к увеличению массы мягкого микробного зубного налета. Если налет покрытие не смыть, то сразу начинается процесс постепенного отвердевания мягкого налета. Это происходит за счет его пропитывания минеральными сплавами, содержащимися в слизи.

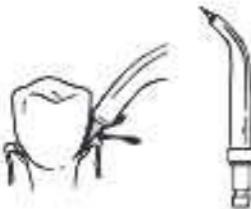

У насадки есть силиконовый юбчик с узким отверстием, которое формирует тонкую струю. Струя обладает большей энергией, чем из обычной струйной насадки, эта сила струи удаляет зубной камень и налет из-под линии десны. Помимо воды можно использовать специальные растворы для полоскания, а также жидкие пероральные лекарства.


Насадка для ортодонтических конструкций

Насадка для ортодонтических конструкций разработана для людей, которые проходят ортодонтическое лечение. Данная насадка позволяет одновременно чистить и вымывать остатки еды из труднодоступных областей зубов и вокруг брекетов.

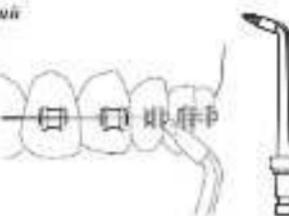

Насадка для чистки языка

Чистка языка — обязательная процедура, которую надо делать ежедневно каждому человеку. После употребления пищи только 10% бактерий остается на зубах, а 90% — на языке. Неконтролируемое размножение бактерий на слизистой полости рта, в том числе и на языке, может привести к таким заболеваниям, как стоматит, гингивит, карбис и т.д. После того как вы обработали ирригатором всю полость рта, поочередно зубы щеткой с пастой, переходите к языку.

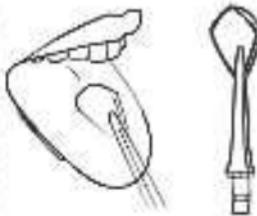

Приведем порядок действий:

- 1) Установите насадку для чистки языка в держатель.
- 2) Начинайте от вершины языка, постепенно переходя в кончик. Достаточно несколько раз пропустить данной насадкой по языку.
- 3) После процедуры тщательно проксимальите рт.

Советы по использованию

Если вы пользовались ирригатором в первый раз, установите самый слабый режим, иначе чувствительные десны могут быть травмированы потоком воды. Со временем десны привыкнут к такимощущениям, и можно будет попробовать установить другие режимы.

У ирригатора есть функция замены. После нажатия на кнопку «Выс./Низ.» будет включен тот режим, который вы устанавливали при предыдущем включении.

Вы можете переключать режимы в высочайшем ирригаторе.

В первое время использование возможно небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.

Крышку отверстия для заправки вода лучше открывать после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Если крышку не открывать и ирригатор не использовать несколько дней, внутренние части могут «задыхнуться» и при последующем использовании занять запрятанный запах застоявшейся воды.

Рекомендуемая температура воды или раствора должна быть не выше 45 °C, ориентируйтесь на свою ощущение, спустя некоторое время вы поймете воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Если вместо обычной воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Открывайте крышку резервуара аккуратно, строго вверх. Не раскручивайте ее на сторону, иначе крепления крышки могут сломаться.

Чистка и обслуживание ирригатора

Протирите корпус прибора сухой, а затем влажной тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Меняйте насадки по мере износа.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя сам прибор на струю пульта дистанционного управления.

Если имеется запасочный щит, используйте специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать, промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Как избавиться от известкового налета

Внутри ирригатора со временем накапливаются известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет накапливается как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благоприятной средой для размножения болезнественных бактерий и микроорганизмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет с всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции на данном средстве.

Также вы можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 150 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора. Включите неподвижно ирригатор, после этого оставьте на 15–20 минут. Затем выключите ирригатор и промойте с чистой водой несущий раз.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не давайте детям без присмотра пользоваться устройством.

Аккумулятор ирригатора питательный, поэтому при длительном хранении ирригатор лучше хранить ишохолину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить аккумулятор и заряжать его примерно 2,5–3 часа. Таким образом, ирригатор будет заряжен примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 15–18 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, помойте и высушите все части прибора. Перекройте резервуар и залейте воду. Уберите ирригатор на хранение в коробку.

Устранение неисправностей

Устройство не включается, индикации не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети.

Вода вытекает из места соединения насадки с корпусом

Возможная причина	Решение
Уплотнительная пластиковая часть струйной насадки повредилась или потерялась, и между насадкой и корпусом образовался зазор	Обратитесь к производителю за новой насадкой и установите ее согласно инструкции.

Из резервуара льется вода

Возможная причина	Решение
Крышка отверстия для слияния воды пропускает воду	Обратитесь к производителю за новым уплотнительным колпачком, установите его в крышку резервуара.
Уплотнительное кольцо в верхней части резервуара пропускает воду	Обратитесь к производителю за новым уплотнительным кольцом, установите его в верхнюю часть резервуара.

Низкое давление

Возможная причина	Решение
Ирригатор разряжается	Пронизвите зарядку согласно инструкции так, как написано в разделе «Зарядка ирригатора».
Насадка сломалась	Замените насадку на новую.

Ирригатор работает несколько минут, и затем выключается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор пришел в негодность	Обратитесь к производителю за новым аккумулятором.
USB-шнур с нестандартным разъемом повредился	Обратитесь к производителю за новым USB-шнуром.

Не снимается насадка

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку снятия насадки	Нажмите на кнопку снятия насадки и опустите насадку вверх.



Вода не поступает

Причинные причины	Решение
Насадка засорилась или сломалась.	Замените насадку на новую, если она сломалась. Или хорошо промойте насадку, встаньте сидя прибор и вставляйте резервуар перед использованием.
Насадка засорилась на резервуаре или на внутренних поверхностях прибора.	Произведите инспекцию прибора так, как описано в разделе «Чистка и обслуживание прибора».
Если вы впервые используете прибор или вы его долго не использовали, вода может не поступать сразу после включения прибора	Добавьте небольшое количество воды в место, куда вставляется насадка. Добавьте воду в это место  После этого вставьте насадку и нажмите кнопку «Выкл/Выкл», чтобы включить устройство

Иrrигатор вдруг остановил работу

Причинные причины	Решение
Сработала защита от перегрева. Чем раньше вы запрерываете использование прибора больше 5 раз, установив самый сильный режим	Оставляйте прибор на 2 часа, а после этого попробуйте его включить.

Иrrигатор не включается

Причинные причины	Решение
Вы оставили прибор разряженным за длительный срок	Для увеличения срока службы батареи заряжайте прибор вовремя, а также не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если это произошло, попробуйте зарядить прибор в течение 16 часов.

Если наша ситуация не отображена выше, напишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пополните также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или за задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Мощность: 21 Вт
2. Напряжение: 110 В, 1 А
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2500 мА·ч (9,25 Вт·ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота пульсации струи: 1200 имп/мин
6. Длина штуру: 0,5 м
7. Давление воды: от 2 до 7,5 бар (и зависимость от выбранного режима)
8. Емкость резервуара: 300 мл
9. Время зарядки: 3–5 часов
10. Режимы работы: 5
11. Автоотключение: через 2 минуты
12. Время работы пригнатора при самом сильном режиме: 30 минут
13. Время работы пригнатора при самом слабом режиме: 60 минут
14. Размер устройства: 73 × 85 × 310 мм
15. Размер упаковки: 120 × 78 × 250 мм
16. Вес нетто: 0,40 кг
17. Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Типор сертифицирован:



Производитель: Швейцария, Бюффонтий Илектрикс Эшленанс
Миниатюрные Ко., Лд. 301 Рум, 3Ф, Блд. 10, Чаккин Сене Энз Технолоджи
Парк, Вэньчжоу Рх., Шаньши Таун, Басин Дистрикт, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
улица, д. 3, лит. Х, офис 1

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территорию РФ:
ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит.
Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (или ит в 9:30 да 17:30 из московского времени), info@airsoft.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или
на сайте airsoft.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей
среде необходимо отнести данный объект от обычных отходов и утилизировать
его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по
утилизации.

Мешки и под изготовлены из упаковки на нижней стороне упаковки запрещены.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение пылесборов, клапана или ресивера для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать качественную воду или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Людям, которые недавно перенесли сердечно-сосудистую или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением притиратора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования притиратора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.
- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте притиратор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Некорректное использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите прибор, извявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении штекера от розетки.
- Не используйте устройство, если шнур питания, или другие части прибора, повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

Ирригатор для полости рта
КТ-2920

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лица, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором, ирригатор не игрушка.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования.
11. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °C.
12. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Ирригатор — это не игрушка.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к повреждению устройства или получению травмы.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-3

Другие товары Kitfort

**Вертикальный пылесос KT-586**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылеуборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

**Увлажнитель воздуха KT-2810**

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды


**Калоринатор KT-751**

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл

**Аэрогриль KT-2219**

- 20 программ приготовления
- емкость чаша: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- решетка, решетка и жарница



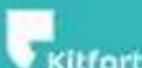

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и разыгрыванием в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Контактент! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми сюжетами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87