




RL 200 XL

Ауыз қуысына арналған ирригатор

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

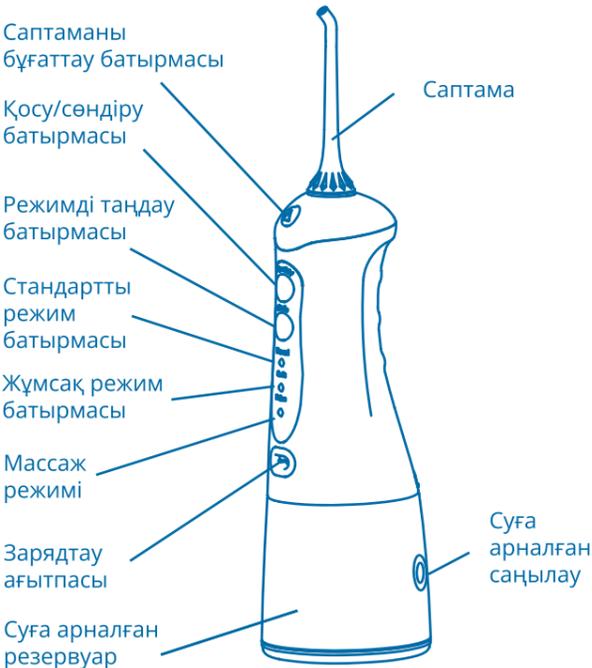

Revline RL 200 XL портативті ауыз қуысының ирригаторын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Ирригаторды қолдану ауыз қуысының гигиеналық қорғаныс деңгейін едәуір арттырады, стоматологиялық аурулардың пайда болуына және дамуына жол бермейді. Пульсирленген су ағыны қызылиектің қанмен қамтамасыз етілуін ынталандырады және олардың жағдайын жақсартады. Жоғары қысым мен пульсирленген су технологиясының үйлесімі ирригаторға тіс аралықтарын, тістердің мойын аймағын және қызылиек атызын тазартуға көмектеседі, бұл әдеттегі тіс щеткасы үшін қол жетімді емес.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Revline RL 200 XL ирригаторын қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Бұл құрылғыны барынша тиімді және ыңғайлы пайдалануға көмектеседі.

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа түсірмеңіз.
2. Душ қабылдау кезінде ирригаторды қолданбаңыз.
3. Электр желісіне қосылған зарядтау құрылғысын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Құрылғыны су құйылған ыдысқа немесе шұңғылшаға түсуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.
5. Зарядтау құрылғысы ақаулы немесе күштік кабель зақымдалған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
6. Су ағынын тілдің астына, құлаққа, мұрын қуысына немесе басқа осал жерлерге бағыттамаңыз. Құрылғы шығаратын қуатты су ағыны осы жерлерде терінің және шырышты қабаттардың тұтастығын бұзуы мүмкін.
7. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
8. Ауыстырылатын саптамаға арналған ұяшыққа бөгде заттарды салмаңыз.
9. Құрылғыны ыстық беттерден алыс зарядтаңыз.
10. Бұрын оттегі немесе аэрозоль қолданылған бөлмеде ирригаторды қоспаңыз.
11. Құрамында йод, май, ағартатын ингредиенттер бар шайғыштарды резервуарға құймаңыз. Олар құрылғының тиімділігі мен қызмет ету мерзімін төмендетеді.
12. Резервуарға емдеуші тіс дәрігері ұсынған суды немесе ерітіндіні құйыңыз.
13. Ирригаторды қолданар алдында барлық алынбалы құрылымдарды ауыз қуысынан алыңыз.
14. Ауыз қуысында немесе тілде ашық жаралар болған кезде құрылғыны қолданбаңыз.
15. Егер сіз денсаулық жағдайы бойынша тәуекел тобында болсаңыз және антибиотиктерді қабылдасаңыз, стоматологиялық емдеуді бастамас бұрын, ирригаторды қолданар алдында тіс дәрігерімен кеңесіңіз.
16. Балалар ирригаторды ересектердің бақылауымен ғана қолдануы мүмкін.

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ

Аккумуляторды зарядтау үшін зарядтау ұяшығына кабель ағытпасын салып, қуат көзін электр желісіне қосу керек. Зарядтауды USB қосылымы арқылы жасауға болады. Мұны істеу үшін зарядтау құрылғысының кабелін қуат көзінен ажыратып, оны қосылған электрондық құрылғының USB ағытпасына

салыңыз. Критикалық разряд және үстеме зарядтау кезінде корпустың дисплейіндегі режим индикаторлары жыпылықтайды. Индикатордың жыпылықтауын тоқтату аккумуляторды зарядтаудың аяқталғанын көрсетеді. Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде аккумуляторды толығымен зарядтау керек. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, толық зарядтау қажет. Аккумуляторды толық зарядтау уақыты 4 сағатты құрайды. Назар аударыңыз! Батареяны зарядтау кезінде құрылғыны пайдалану мүмкін емес.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Резервуардың қақпағын ашыңыз, корпусты еңкейтіңіз, сонда кіріс саңылауы көлденең және ағынның бағытына перпендикуляр болады. Резервуарды қайнатылған, тазартылған сумен толтырыңыз. Резервуардың қақпағын жабыңыз. Құрылғыны қосу үшін ON/OFF қуат батырмасын бір рет басыңыз. Ирригаторды өшіру үшін ON/OFF батырмасын қайтадан басыңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ


Құрылғы сұйықтық қысымының әртүрлі деңгейлерінің үш режимінде жұмыс істей алады:
Normal (Қалыпты)
Soft (Жұмсақ)
Pulse (Массаж)
Режимді таңдау Mode батырмасымен жүзеге асырылады, бұл құрылғының тұтқасындағы тиісті жарық индикаторының қосылуымен расталады. Қосылғаннан кейін ирригатор құрылғыны өшірмес бұрын соңғы қолданылған режимде жұмыс істейді.
Назар аударыңыз! Құрылғыны қолданудың басында soft режимді қолдану ұсынылады. Бұл ирригациялық тазартуға бейімделуге және қызылиектің қабынуы мен қан кету қаупін болдырмауға көмектеседі.

САПТАМАНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

Саптаманы ирригатордың жоғарғы жағында орналасқан ағытпаға орнатыңыз және оны тырс еткенше салыңыз. Саптаманы алып тастау үшін бұғаттау батырмасын басып тұрыңыз және саптаманы құрылғының корпусынан алыңыз.
Назар аударыңыз! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде саптаманы шығару батырмасын баспаңыз.

ИРРИГАЦИЯ РЕЖИМІ

Саптаманы тістің бетіне 45 градус бұрышта орналастырыңыз. Ирригаторды қосыңыз, су ағынын тазалау аймағына бағыттаңыз. Су табиғи түрде ауыз қуысынан шұңғылшаға ағып кетуі керек. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдымен бүйір тістердің аймағын, содан кейін алдыңғы жағын өңдеңіз. Саптаманы тіс аралықтарында ұстап, қызылиек контуры бойымен жылжытыңыз. Режимге тәуелсіз, 120 секунд жұмыс істегеннен кейін құрылғы автоматты

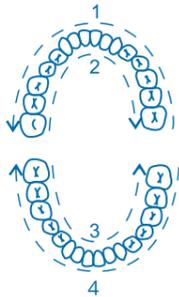

түрде өшеді.

ИРРИГАЦИЯ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН

Қуатты өшіру батырмасын басыңыз. Резервуардағы қалған сұйықтықты төгіп тастаңыз. Қажет болса, резервуарды құрылғыдан ажыратыңыз. Резервуарды алу үшін құрылғының корпусын бір қолыңызға алып, екінші қолыңызға резервуарды сағат тіліне қарсы бұраңыз, осылайша корпустың төменгі жағындағы және резервуардың жоғарғы жағындағы белгілер сәйкес келеді.



ШАЙҒЫШТАР МЕН ЕРІТІНДІЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Жақсы әсер ету үшін Revline шайғыштары мен арнайы бальзамдарды қолданған жөн. Қолданылатын өнімнің нұсқауларына сәйкес дозаны есептеңіз. Ерітінділерді әр қолданғаннан кейін ирригаторды шаю керек.
Назар аударыңыз! Ауыз қуысына арналған кейбір шайғыштардың құрамына спирт кіреді, ол құрылғы жүйесінде ұзақ уақыт болған кезде оның бөлшектерін зақымдауы және сайып келгенде оның қызмет ету мерзімін төмендетуі мүмкін.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны суға батырмаңыз. Құрылғының бетін тазалау үшін жұмсақ шүберек пен жұмсақ абразивті емес тазартқышты пайдаланыңыз. Резервуарды тазалауды жеңілдету үшін оны корпустан ажырату керек. Кермек суды үнемі қолданған кезде құрылғының бөлшектерінде әк шөгінділері пайда болуы мүмкін. Оларды жою үшін суару құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тазалау үшін арнайы Revline құралын пайдаланыңыз. Өндірісі судың кермектігіне байланысты ирригаторды үш айда бір-үш рет тазалауды ұсынады.
Назар аударыңыз! Құрылғының жұмысына байланысты жарақаттануды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін тек өндірісі зауыт ұсынған стандартты бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

ЖИЫНТЫҚТАҒЫ САПТАМАЛАР

Құрылғының негізгі жиынтығында екі стандартты ауыстырылатын саптама бар. Олардың әр түрлі түсті сақиналары бар, бұл әр пайдаланушыға саптамаларды анықтауға мүмкіндік береді. 3-6 ай тұрақты қолданғаннан кейін саптама тозады және тиімділігін жоғалтады. Бұл жағдайда оны гигиеналық себептермен өзгерту ұсынылады.
Назар аударыңыз! Саптама қатаң жеке болуы керек. Бір саптаманы әртүрлі пайдаланушылармен ортақ қолдану ұсынылмайды.

КЕПІЛДІК

Құрылғыға кепілдік – 2 жыл. Құралға кепілдік берілген техникалық қызмет көрсету қолданыстағы кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Әрі қарай, ирригаторға қызмет көрсету сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

Шығын материалдары мен жиынтықтаушыларына. Мақсатына сай емес пайдалану салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға; бүлінуге әкеп соққан абайсызда немесе ұқыпсыз пайдалану (шамадан тыс жүктеуді қоса алғанда); уәкілетті емес ұйымның (жеке тұлғаның) түрлендіруі, ашуы және/немесе жөндеуі; пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану және/немесе сақтау немесе тасымалдау қағидаларын бұзу. Дұрыс емес қуат көзіне қосылу салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға. Жойылмаған кемшіліктермен пайдаланылған тауарларға. Үшінші тұлғалардың әрекеттері, табиғат құбылыстары және табиғи апаттар, үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жәндіктер, тауарлардың бөгде заттар мен сұйықтықтардың енуі сияқты өндірісшіге тәуелді емес себептерден туындаған ақауларға. Пайдалану процесінде және табиғи тозу нәтижесінде пайда болған сыртқы және ішкі ластануларға, сызаттарға, жарықтарға, тозуға және өзге де механикалық зақымдануларға.

ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ

Саптама алынбайды.
Шешім: Саптаманы алу кезінде құрылғының корпусында орналасқан саптаманы бұғаттау батырмасын басып тұрыңыз.

Ағынның қысым деңгейін таңдаудағы қиындықтар

Шешім: Құрылғыны қосқаннан кейін құрылғының қажетті жұмыс режимін таңдаңыз. Ирригация тиімділігін арттыру үшін сізге ыңғайсыздық тудырмайтын режимді қолданыңыз. Қызылиектің қабынуы мен әлсіздігі үшін арнайы периодонтальды саптаманы қолданыңыз.

Ирригация кезінде қан кету

Шешім: қан кету бұл қызыл иектің қабынуының тән симптомы болып табылады. Қан кету кезінде төмен қысымды ирригатордың жұмыс режимін таңдау керек. Ирригатор қызылиектің бетіндегі тіс өңездерін мен бактерияларды кетіреді. Егер одан әрі қолданған кезде қан кету жалғаса берсе, тіс дәрігерінен кеңес алу керек.

Судың шашырауын қалай болдырмауға болады?

Шешім: Ирригация кезінде аузыңызды кең ашып тік тұрмаңыз. Шұңғылшаға қарай еңкейіп, аузыңызды ашыңыз. Су табиғи түрде ауыз қуысынан ағып кетеді.

ЖИЫНТЫҚ

Revline RL 200 XL ирригаторының негізгі блогы. Стандартты саптама – 2 дана. USB зарядтау құрылғысы. USB кабелі. Жол қабы. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Егер сізде сұрақтар туындаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі: RL 200 XL.
Тіс және қызылиек ауруларының алдын алуға арналған.
Су қысымының деңгейі: 210-700 кПа.
Пульсация жиілігі: минутына 1400-1800.
Резервуардың сыйымдылығы: 300 мл.
Корпустың ылғалдан қорғауы: IPX7.
Корпус материалы: ABS.
Қуат: аккумулятор 1400 mAh.
Толық зарядтау уақыты: 4 сағат.
Батареяның қызмет ету мерзімі: 4 сағат.
Қуат тұтыну: 5 Вт.
Шу деңгейі: 72 Дб аз.
Өлшемдері: 219x85x73 мм.
Салмағы: 245 г.
Тауардың жарамдылық мерзімі жоқ.
Орташа қызмет ету мерзімі: 5 жыл.
Кепілдік: 2 жыл.
Бөлме температурасында сақтаңыз.

Ресей Федерациясындағы импорттаушы
МГАДЖЕТ ЖШҚ
Мекенжайы: 140002, Люберцы қ., Октябрьский даңғ., 20-үй, 2-корпус.

Қазақстандағы импорттаушы: МГАДЖЕТ КЗ ЖШС
Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 23а, 24-офис.

Қызмет ету мерзімі 5 жыл.
Тауар сертификатталған.

Өндірілген: Fly Cat Electrical Co., Ltd., 101-401 of No.28 Bldg & 101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park, Baishixia Community, Fuyong Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Кепілдік талоны

Ұйымның атауы

Сату күні

Мөрге арналған орын