
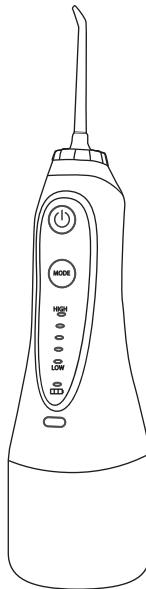


REVYLINE

RL 450

ЫҚШАМ ирригатор

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

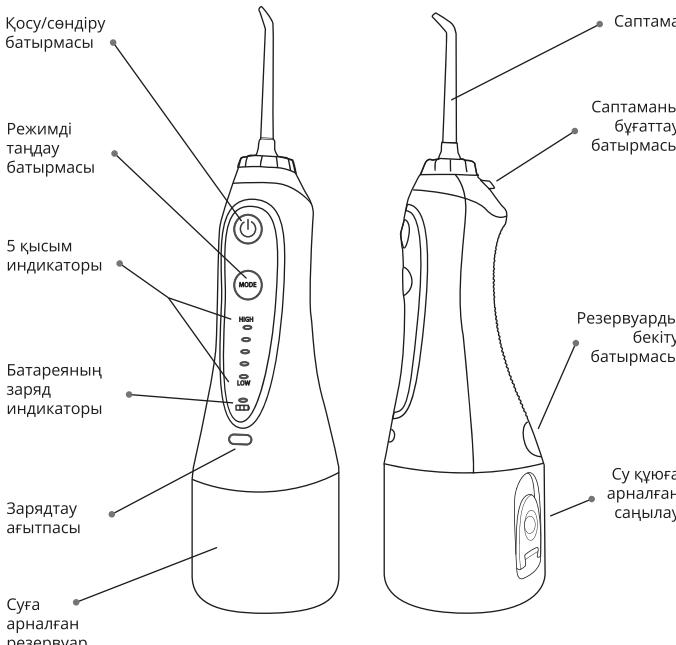

Құттықтаймыз!

Құрметті клиент, Сіз тістеріңз ғана қызыл иектерініздің сау және әдемі болуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғының иесі болдыңыз. Бірінші қолданғаннан кейін тазалықтың жаңа деңгейін сезініңз.

Сақтық шаралары

Revyline RL 450 ирригаторын бірінші рет рет қолданар алдында пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз.

Электр жарақаттарының, қүйітердің, өрттің алдын алу үшін:

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа түсірменіз.
2. Душ қабылдау кезінде ирригаторды пайдаланбаңыз.
3. Электр желісіне қосылған зарядтау құрылғысын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Құрылғыны су бар ыдысқа немесе шұнғышлаға түсірімін жерлерде сақтамаңыз.
5. Зарядтау құрылғысы ақаулы болса немесе қуат кабелі зақымдалған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
6. Су ағынын тілдің астына, құлаққа, мұрынға немесе басқа сезімтал жерлерге бағыттамаңыз. Құрылғы терінің және шырышты қабаттардың тұтастығын бұзуы мүмкін күшті су ағынын тудырады.
7. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдалаңыңыз.
8. Ауыстырылатын саптамаға арналған ұяшыққа бөгде заттарды салмаңыз.
9. Құрылғыны ыстық беттерден алыс зарядтаңыз.
10. Бұрын оттегі немесе аэрозольдер қолданылған бөлмеде ирригаторды қоспаңыз.
11. Құрамында йод, май, ағартатын ингредиенттер бар шайғыштарды резервуарға құймаңыз. Олар құрылғының тиімділігі мен қызмет ету мерзімін төмендеді.
12. Резервуарға суды немесе емдеуші тіс дәрігері ұсынған ерітіндін құйыңыз.
13. Ирригаторды қолданар алдында барлық алынбалы құрылымдарды ауыз қуысынан алып тастаңыз.
14. Егер ауыз қуысында немесе тілде жарапар болса, құрылғыны қолданбаңыз.
15. Балалардың ирригаторды қолдануы ересектердің бақылауымен ғана мүмкін болады.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумуляторды зарядтау үшін ирригаторды жинақа кіретін USB ағытпасы бар кабель арқылы құрылғыға немесе қуат блогына қосу керек. Аккумуляторды қайта зарядтау кезінде корпусың дисплейіндегі режим индикаторлары жыптықтайты. Индикаторлардың жыптықтаудың тоқтату аккумуляторды зарядтаудың аяқталғанын көрсетеді. Аккумулятор заряды таусылған кезде қызыл индикатор жанады. Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде аккумуляторлық батареяны толығымен зарядтау керек. Аккумулятор толық зарядтағаннан кейін кек индикатор жанады. Аккумуляторды толық зарядтау уақыты қуат кезінде байланысты 4-5 сағатты құрайды.

Назар аударыңыз! Аккумуляторды зарядтау кезінде құрылғыны пайдалану мүмкін емес.


Жұмыс режимін таңдау

Құрылғы әртүрлі қысым деңгейлерімен тазалау (ирригация) режимінде жұмыс істей алады:

- 1 - 130 кПа
- 2 - 270 кПа
- 3 - 550 кПа
- 4 - 650 кПа
- 5 - 760 кПа


Тазалау режиміндегі қысым деңгейін таңдау MODE батырмасымен жүзеге асырылады, бұл құрылғының корпусындағы тиісті жарық индикаторын қосумен расталады. Қосылғаннан кейін ирригатор құрылғыны өшірмес бұрын соғы қолданылған режимде жұмыс істейді.

Назар аударыңыз! Құрылғыны қолданудың алғашқы кезеңінде төмен қысымды құрылғыны пайдалану ұсынылады. Бұл суара тазартуға бейімделуге және қызыл иектің қабынуы мен қан кету қаупін болдырмауға көмектеседі.

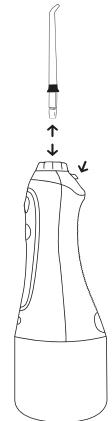

Саптаманы орнату және ауыстыру

Саптаманы ирригатордың жоғардың жағында орналасқан ағытпаға орнатыңыз және оны тырс еткенше итере салыңыз. Саптаманы алып тастау үшін бұғаттау батырмасын басып тұрыңыз және саптаманы құрылғының корпусынан алыңыз.

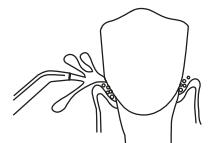

Назар аударыңыз! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде саптаманы шығару батырмасын баспаңыз.

Ирригация режимі

Саптаманы тістің бетіне 45 градус бұрышпен орналастырыңыз. Ирригаторды қосыңыз, су ағынын тазалау аймағына бағыттаңыз. Су табиги түрде ауыз қуысынан шұнғышлаға ағып кетуі керек. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдымен бүйір тістердің аймағын, содан кейін алдыңы жағын өңдеңіз. Саптаманы тіс аралықтарында ұстап, қызылиек контуры бойымен жылжытыңыз.

Ирригацияны аяқталғаннан кейін

Қуатты өшіру батырмасын басыңыз. Резервуардағы қалған сұйықтықты төгіп тастаңыз. Қажет болса, құрылғыны зарядтаңыз.

