

REVYLINE


RL 240

PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА



Revyline is your professional
care of teeth and gums at home
Профессиональная защита зубов и десен
в домашних условиях

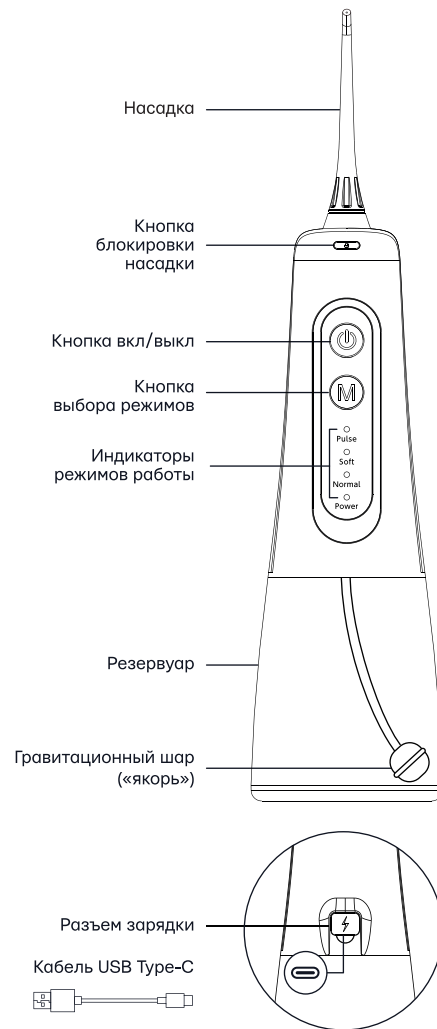

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE Модель: RL 240

Предназначен для профилактики
болезней зубов и десен.

- 4 режима работы
- Емкость резервуара: 300 мл
- Уровень давления жидкости: 207–827 кПа
- Частота пульсации: 1400–1800 в мин.
- Литиево-ионный аккумулятор: 1500 mAh
- Время полной зарядки: 4 ч.
- Уровень влагозащиты: IPX7
- Потребляемая мощность: 5 Вт
- Материал корпуса: ABS-PC
- Гарантия: 2 года
- Средний срок службы: 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Более подробная информация о мерах
предосторожности, предупреждениях
медицинского характера, зарядке
аккумулятора, процессе чистки, уходе
за ирригатором, гарантийных случаях –
на сайте.

www.revyline.ru

СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ

ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

Электрические звуковые зубные щетки



Электрическая звуковая зубная
щетка благодаря интенсивности
колебаний щетинок улучшает
качество чистки зубов, полирует
эмаль, эффективно очищает
межзубные промежутки, зубодес-
невую линию.

Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки
важно обращать внимание на
следующее: у вашей щетки
должна быть высокая плотность
щетины (не менее 5000–6000
щетинок), кончики щетинок
должны быть скругленными,
а головка – компактной.

Монопучковые щетки



Монопучковая щетка используется
для точечного очищения зубов,
особенно дальних, межзубных
промежутков, а также придесневой
линии. Она незаменима при
уходе за брекетами и другими
ортодонтическими конструкциями.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное
средство ухода за полостью рта.
К ее выбору нужно подходить
индивидуально, учитывая состав,
предназначение, уровень абразивности
и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает
пространства между зубами.
В ассортименте Revyline – плоские и
круглые, вощеные и невоощеные нити.

Скребки для языка



Скребок удаляет бактериальный
налет с поверхности языка, что
предотвращает развитие целого ряда
стоматологических заболеваний.

Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении
межзубных промежутков и боковых
поверхностей зубов, незаменим при
уходе за несъемными ортодонтиче-
скими конструкциями, имплантатами
и оголенными шейками зубов.

Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели предна-
значены для гигиенического ухода,
профилактики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний. Используются
как средства для ополаскивания
полости рта и для приготовления
растворов для процедур ирригации.

REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы не просто развиваем наш бренд –
мы делаем гигиену полости рта эффективной,
осознанной и доступной каждому, мы получаем
возможность поддерживать школы и детские сады,
больницы и детские дома, а также – самые разные
благотворительные и учебные проекты.



Вместе с вами
мы дарим улыбку тем,
кому она особенно
необходима!

Максим Обушенков,
врач-стоматолог,
руководитель компании
Revyline (основана в 2013 году)



Каждый товар Revyline имеет
сертификат качества.



Гарантия на все электрические приборы
бренда Revyline – 2 года.



Сервисные центры Revyline есть на всей
территории России.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном
приборе на той площадке, где Вы приобрели его,
пришлите ссылку на опубликованный отзыв
в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите **200 руб.**
на Ваш телефон за отзывы!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:

+7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru



Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

ИНСТРУКЦИЯ

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект.

Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью.

Одновременное мигание индикаторов режимов свидетельствует о том, что уровень заряда низкий.

В процессе зарядки индикаторы режимов включаются и гаснут последовательно – один за другим.

Когда прибор заряжен полностью, все индикаторы горят одновременно.

Время полной зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов в зависимости от источника питания.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации портативного ирригатора RL 240 3 сменные насадки:

2 стандартные насадки для регулярного использования.

Насадка-щетка для дополнительного ухода за зубами и деснами.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Установка и снятие резервуара для жидкости

Удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.

Примечание:

В резервуаре вы можете заметить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.

Наполнение резервуара

Снимите резервуар и наполните его очищенной водой. Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

Включение и выключение прибора

- 1 Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ.
- 2 Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Выбор режима работы

Выбор режима работы осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства.

Портативный ирригатор RL 240 позволяет использовать 4 режима работы:

Pulse Ирригатор меняет давление, чередуя высокое и низкое. Режим рекомендован для ежедневного применения и массажа десен.

Soft Низкое давление подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен, режим идеален в начале использования ирригатора.

Normal Режим предназначен для регулярного использования, эффективно удаляет остатки пищи и бактериальный налет из межзубных промежутков и с поверхности зубов.

Power Самый интенсивный из четырех режимов: ирригация происходит на максимальном давлении.

После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Режим ирригации


Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба.

Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.

Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.

Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.

Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

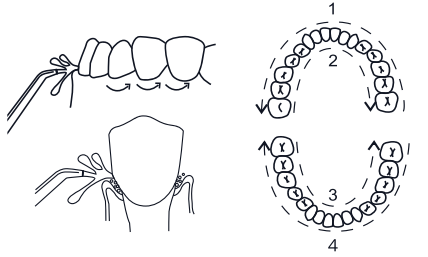

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!

Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха.

Уход и обслуживание

Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.

Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их устранения используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 3 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru

Импортер/Importer: ООО "МГАДЖЕТ", 140002, г.Люберцы, Октябрьский проспект 20, корп. 2 / MGADGET LLC, 140002, Lyubertsy city, Oktyabrski prospect 20, bld. 2
Импортер в Казахстан/Kazakhstan Importer: TOO "МГАДЖЕТ КЗ", г. Алматы, ул. Толе би 23А, офис 24 / LLP MGADJET KZ, Almaty city, st. Tole bi 23A, office 24
Дата производства/Manufacturing date: Декабрь 2023/December 2023

Производитель:
Dongguan Mingchuang Youshang Electronic Technology Co.,Ltd. -6th Floor, Building 5, Haiyong Science and Technology Park, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China/Китай