


МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ D603



- 1** Кнопка включения/выключения
Переключение режимов
- 2** Индикатор
- 3** Массажные головки



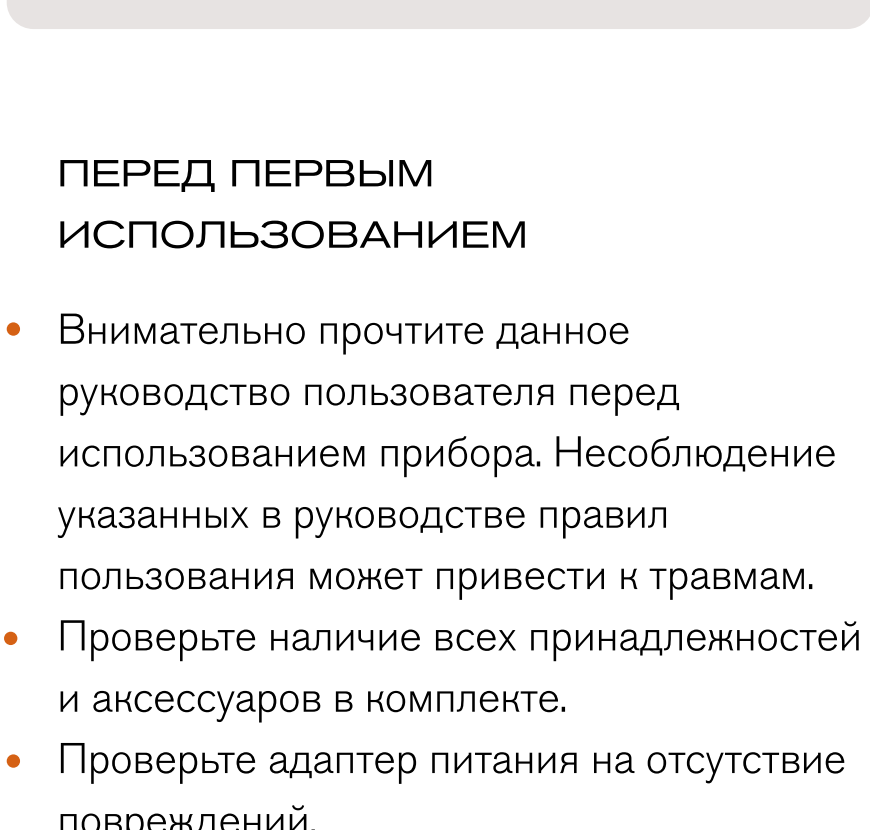

- 1** Контакты
- 2** Разъем для подключения
сетевое кабеля
- 3** База для подзарядки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам.
- Проверьте наличие всех принадлежностей и аксессуаров в комплекте.
- Проверьте адаптер питания на отсутствие повреждений.

При включении зарядки во время работы прибора, автоматически включится программа самозащиты и массажер прекратит работу. Для полной зарядки массажера необходимо от 2 до 3 часов.

ВКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

- Нажмите кнопку . Массажер немедленно начнет работу. Удерживайте кнопку , чтобы выключить прибор.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Массажер имеет три режима использования.

Режим 1


Быстрое вращение массажных головок; белый индикатор мигает однократно, а затем горит постоянно.

Режим 2

Медленное вращение массажных головок; белый индикатор мигает двукратно, а затем горит постоянно.

Режим 3

Быстрое и медленное вращение массажных головок работает попеременно; белый индикатор мигает трехкратно, а затем горит постоянно.

После включения питания режим 1 установлен по умолчанию. Для переключения между режимами нажимайте кнопку .

ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Поместите массажер на базу для зарядки, подключенную к сети.

Индикатор питания аккумулятора мигает при зарядке. По окончании зарядки индикатор будет гореть постоянно.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите устройство.
- Протрите устройство салфеткой или мягкой тканью, смоченной в воде. Не наносите воду или очищающие средства напрямую на массажер.
- При чистке массажных головок используйте хлопковую ткань, смоченную спиртом.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

При длительном хранении рекомендуется заряжать устройство 1 раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочитайте и сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем. Компания-производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования или несоблюдения положений руководства пользователя.
- Не применяйте прибор для массажа прооперированных частей тела или проходящих лечение, если участок кожи подвергся травмам, раздражению, воспалению, нагрузке и т.д. Соблюдайте указания врача.
- Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование продукта.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования. Массажер является предметом личной гигиены.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Не рекомендуется использовать беременным женщинам, детям, женщинам в период менструаций.
- Не используйте прибор во время вождения.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Избегайте ударов и падений прибора. Не допускайте взаимодействия острых предметов с прибором.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере.
- Перед чисткой обязательно выключите прибор. После использования поместите устройство в безопасное место. Не ставьте на прибор какие-либо изделия.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону Службы Заботы 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер

Напряжение на входе: 100–240 В ~ 0,2 А

Частота: 50/60 Гц

Напряжение на выходе: 5 В ~ 1 А

Зарядная база

Напряжение на входе: 5 В ~ 1 А

Напряжение на выходе: 5 В ~ 1 А

Прибор

Напряжение: 5 В ~ 1 А

Мощность: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 1150 мА·ч

Разъем для зарядки устройства: micro USB

Габариты (В×Ш×Г): 110×120×82 мм

Вес: 0,320 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа головы. Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Зарядная база: 1 шт.

Адаптер: 1 шт.

Сетевой кабель: 1 шт.

Салфетка для очистки: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.