


BORK

МАССАЖЕР ДЛЯ РУК D604

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK


Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

Массажер D604 предназначен для расслабляющего массажа ладоней и снятия усталости после рабочего дня. Благодаря персональным настройкам интенсивности и степени нагрева вы можете подобрать подходящий вам режим.



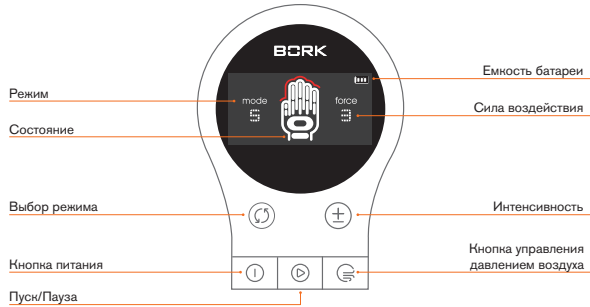

Массаж ладоней после рабочего дня также предотвращает возникновение «туннельного синдрома» — проблем в области кистей рук при нахождении длительное время в изогнутом положении с клавиатурой, компьютерной мышью и других ситуациях. Сеанс релаксации благотворно скажется на вашей работоспособности при работе за компьютером.





ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Проверьте наличие всех принадлежностей и аксессуаров в комплекте.
- Проверьте адаптер питания на отсутствие повреждений.
- Полностью зарядите массажер. Для этого используйте сетевой кабель и адаптер питания, поставляемые в комплекте.


ВКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку , чтобы активировать массажер.
- Нажмите кнопку , чтобы прибор начал работу. При повторном нажатии кнопки  массажер приостановит работу.
- При еще одном нажатии кнопки  массажер будет деактивирован.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Массажер имеет 5 автоматических режимов массажа. Выберите подходящий для вас режим кнопкой выбора . В каждом режиме есть три степени силы воздействия. Степень воздействия регулируется кнопкой .

В каждом из режимов есть пять конфигураций массажа. После включения питания конфигурация 1 установлена по умолчанию.

Если давление на руку в процессе массажа слишком велико, нажмите кнопку , чтобы сбросить его.

ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется использовать и хранить массажер при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Перед очисткой выключите массажер.
- Не ставьте на прибор тяжелые предметы.
- Если прибор не использовался более 6 месяцев, перед началом использования проверьте его нормальное функционирование.
- Не держите массажер рядом с электрическим нагревателем или плитой и не подвергайте его воздействию солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Снимите украшения с рук при использовании массажера.
- Не полируйте ногти на руках в течение 1 часа до использования продукта.
- Чтобы предотвратить повреждение подушки безопасности, связанное с избыточным давлением, включайте продукт только после того, как вставите в него руки.
- Некоторые высокочувствительные пользователи могут испытывать небольшую боль при использовании продукта.
- Сразу после использования массажера на коже могут оставаться следы – это нормально. Такие отметки обычно исчезают в течение 15 минут.
- Не используйте продукт после употребления алкоголя, если плохо себя чувствуете или во время вождения.
- Лицам после инсульта, с сосудистыми заболеваниями или гипогликемией запрещается использовать этот продукт.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Лицам с кардиостимулятором или электронным протезом, беременным женщинам нельзя использовать этот продукт.
- Не используйте массажер, если на руках есть сыпь или инфекция. Не используйте продукт после операции или лечения кистей рук.
- Продукт не заменяет собой диагностику или лечение медицинским специалистом.

- Проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что использование массажера для вас безопасно.
- Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, немедленно остановите и выключите продукт.
- Вынимайте руки после выключения массажера. Если массажер внезапно перестает работать, попробуйте потянуть руки, поворачивая их влево и вправо.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования. Массажер является предметом личной гигиены.
- При чистке продукта используйте стерилизованный хлопок, смоченный нейтральным моющим средством. Не используйте воду в качестве очищающей жидкости.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: DC 5В

Мощность: 6 Вт

Габариты (Ш×Г×В): 235×145×98 мм

Вес: 740 г

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:
предназначен для массажа кисти руки.
Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для рук: 1 шт.

Адаптер питания: 1 шт.

Сетевой шнур: 1 шт.

Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, комплектацию
и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно
посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием
техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	МАССАЖЕР ДЛЯ РУК	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.	
Модель	D604	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Серийный номер	Подпись покупателя	Подпись продавца
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)
		М.П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

