


GÉZATONE

**МАССАЖЕР
ДЛЯ ШЕИ И СПИНЫ**

AMG 395

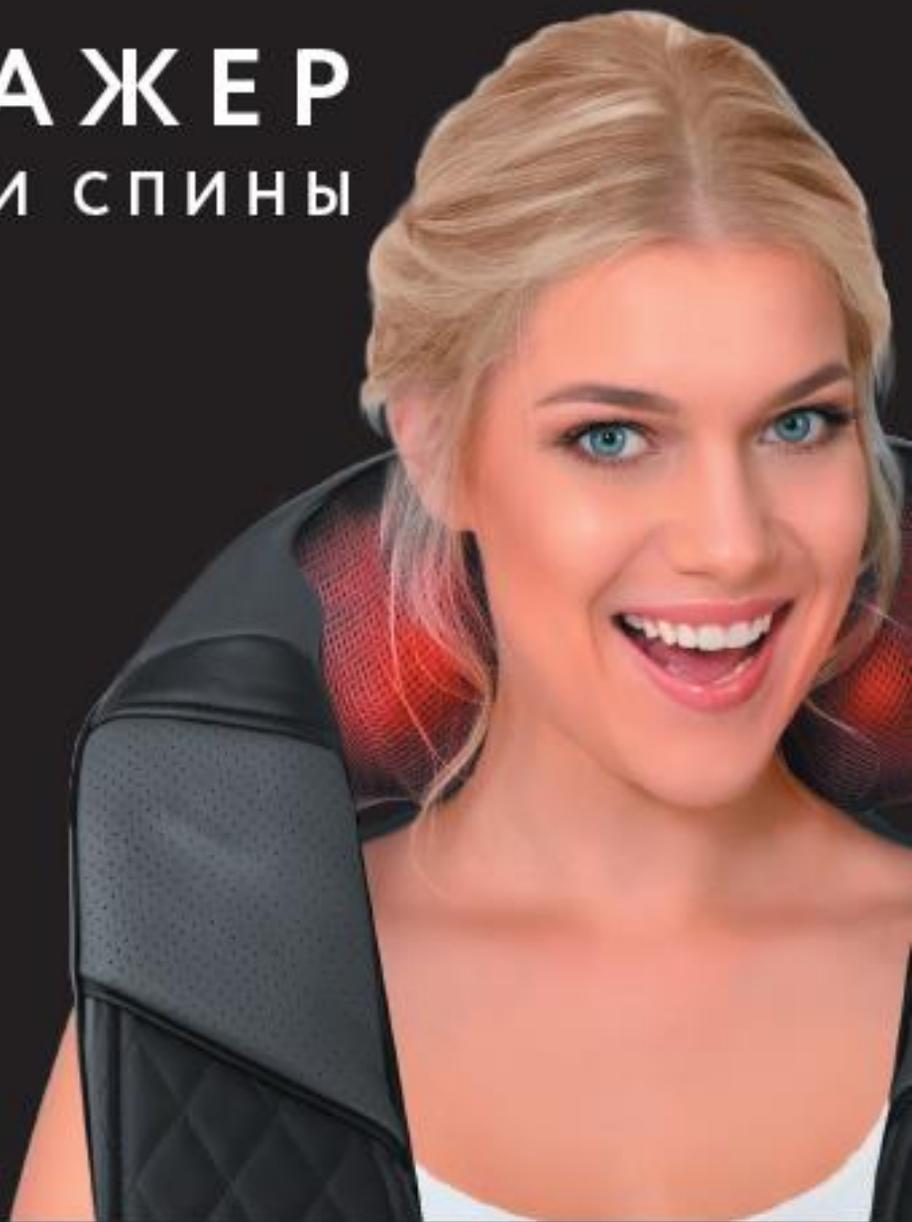

iRELAX

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


НАПРЯЖЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ, СИДЯЧАЯ РАБОТА, ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗА РУЛЕМ, ПОСТОЯННЫЕ СТРЕССЫ И УСТАЛОСТЬ ВЫЗЫВАЮТ ЛОМОТУ И БОЛЬ В МЫШЦАХ ШЕИ, СПИНЫ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА. С АППАРАТОМ iRELAX AMG 395 МОЖНО ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО И ТОНИЗИРУЮЩЕГО МАССАЖА ДОМА И НА РАБОТЕ. МАССАЖЕР УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ВОЗВРАЩАЯ ТЕЛУ БОДРОСТЬ, СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ И СПАЗМ, ПОМОГАЕТ В КУРСАХ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ.



СКОВАННОСТЬ, БОЛЬ И УСТАЛОСТЬ МЫШЦ СПИНЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ



ЦЕЛЛЮЛИТ ЛЮБОЙ СТАДИИ, НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ И СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ

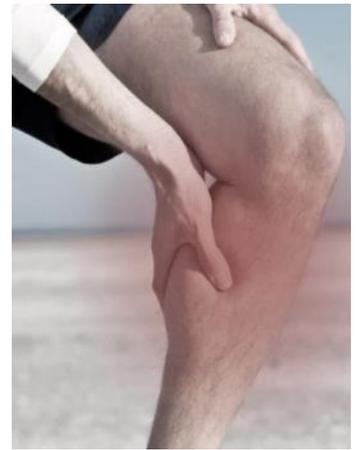

«БОЛЕЗНЕННЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В НОГАХ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ХОДЬБЫ ИЛИ СТОЯНИЯ, ОТЕКИ



«СИДЯЧАЯ» РАБОТА, МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРИ НЕДОСТАТКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ



СКОВАННОСТЬ ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК И ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКЕ



ГИПЕРТОНУС МЫШЦ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ, УСТРАНЕНИЕ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ

ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА



В ОСНОВЕ РАБОТЫ МАССАЖЕРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД РОЛИКОВОГО МАССАЖА, КОТОРЫЙ ПРОРАБАТЫВАЕТ СПАЗМИРОВАННЫЕ И УСТАВШИЕ МЫШЦЫ.



ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ, ОТКЛЮЧАЯ ИЛИ ВКЛЮЧАЯ КНОПКОЙ.

Артикул 1301137

3

СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ

15

СМАРТ –ТАЙМЕР
15 МИНУТ



МАССАЖ ЛЮБОЙ
ЧАСТИ ТЕЛА



ИК ПРОГРЕВ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ ИМИТИРУЕТ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНОГО МАССАЖА.

ПРОРАБАТЫВАЯ УСТАВШИЕ МЫШЦЫ, РОЛИКИ УСТРАНЯЮТ СПАЗМ, БОЛЕЗНЕННОСТЬ, СКОВАННОСТЬ, ОНЕМЕНИЕ И ДИСКОНФОРТ.

ДЕЙСТВИЕ РОЛИКОВ НА МЫШЦЫ СПОСОБСТВУЕТ РАССЛАБЛЕНИЮ, УСТРАНЕНИЮ ЧУВСТВА НАПРЯЖЕНИЯ И УСТАЛОСТИ.



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

ВЫЗЫВАЕТ РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ И УЛУЧШАЕТ КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ ТКАНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И КИСЛОРОД, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

ДЕЙСТВИЕ РОЛИКОВОГО МАССАЖА



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ИК ПРОГРЕВ



ИК ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЫШЦАХ, УСИЛИВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РОЛИКОВОГО МАССАЖА.

ТЕПЛО РАССЛАБЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ, ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ ОКАЗЫВАЕТ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ТЕЛО, РАССЛАБЛЯЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ

ИК ПРОГРЕВ УСИЛИВАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И АКТИВИЗИРУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. УСТРАНЯЕТ СПАЗМ И РАССЛАБЛЯЕТ, УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛЕЗНЕННОСТИ МЫШЦ .



ДЕЙСТВИЕ ИК ПРОГРЕВА



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
И АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖЕРА

МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЕН, ОН ПОМОЖЕТ И МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ, ОБРАЗА И РИТМА ЖИЗНИ.



ШЕЯ И ПЛЕЧИ



ОБЛАСТЬ СПИНЫ



ОБЛАСТЬ ПОЯСНИЦЫ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН МАССАЖЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА КОНКРЕТНУЮ ОБЛАСТЬ ТЕЛА, ВОССТАНОВИТЬ КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ И СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ.



Артикул 1301137



ОБЛАСТЬ ЖИВОТА



СТОПЫ, РУКИ И КИСТИ РУК



БЕДРА И ИКРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ.
- ПОСЛЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, МАССАЖЕР ПОМОЖЕТ ЗАБЫТЬ О БОЛИ В МЫШЦАХ.
- **ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА** ПОМОГАЕТ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ЗОНЫ ТЕЛА..
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА, В ОФИСЕ И В ПОЕЗДКАХ.
- **ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ**, ВЫ НЕ ПОДСТРАИВАЕТЕСЬ ПОД ГРАФИК РАБОТЫ МАССАЖИСТА.
- МАССАЖ ДЛИТСЯ ОТ **15 МИНУТ**, ПОСЛЕ ЧЕГО УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ И НЕ СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- **УДОБНАЯ СУМКА** ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ В КОМПЛЕКТЕ С МАССАЖЕРОМ.

Артикул 1301137

2

ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



ДЛЯ МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН



3 СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ



УДОБНАЯ СУМКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



СМАРТ –ТАЙМЕР
15 МИНУТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

МАССАЖ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ БЕССОННИЦЫ И ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ, СОЧЕТАНИЕ РОЛИКОВОГО МАССАЖА С ИНФРАКРАСНЫМ ТЕПЛОМ ДЕЛАЕТ МАССАЖЕР ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО МЫШЦ НО И УСТРАНЯЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССА.



ДЫШАЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

МЯГКОЕ И КОМФОРТНОЕ ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.
ЛЕГКО ПРОПУСКАЕТ И РАССЕИВАЕТ ТЕПЛО.
НАДЕЖНОЕ И ПРОЧНОЕ, НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ.

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ РЕГУЛИРОВКИ СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, МОЖНО ВЫБРАТЬ КОМФОРТНУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА, ИЗМЕНИТЬ ВРАЩЕНИЕ РОЛИКОВ, ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ИК ПРОГРЕВА.




ТИХАЯ РАБОТА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАССАЖЕР НЕ ШУМИТ И НЕ СОЗДАЕТ ДИСКОМФОРТА, КАК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ РЯДОМ.



ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ РОЛИКОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ ПОЗВОЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА МЫШЦЫ.

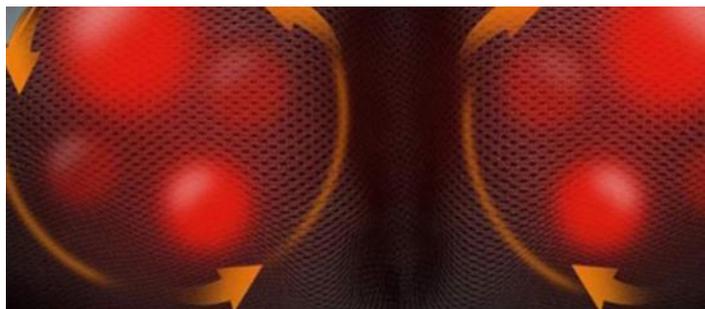

ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА

ЧЕХОЛ
МАССАЖЕРА

ВСТРОЕННЫЕ
МАССАЖНЫЕ
РОЛИКИ

Артикул 1301137

ВСТРОЕННЫЕ
МАССАЖНЫЕ РОЛИКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОДРУЧНИКИ

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ



КНОПКА ПИТАНИЯ
(ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИК ПРОГРЕВА



РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДАПТЕРА
(АВТОМОБИЛЬНОГО ИЛИ
СЕТЕВОГО)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1


УДОБНО РАСПОЛОЖИТЕСЬ В КРЕСЛЕ ИЛИ НА СТУЛЕ, ДИВАНЕ.
МАССАЖЕР ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ОБЛАСТИ МАССАЖА

2

ВКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР НАЖАТИЕМ КНОПКИ ПИТАНИЯ, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ, ФУНКЦИЮ ИК ПРОГРЕВА И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ.

3

ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ МАССАЖЕР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ.
А ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ.

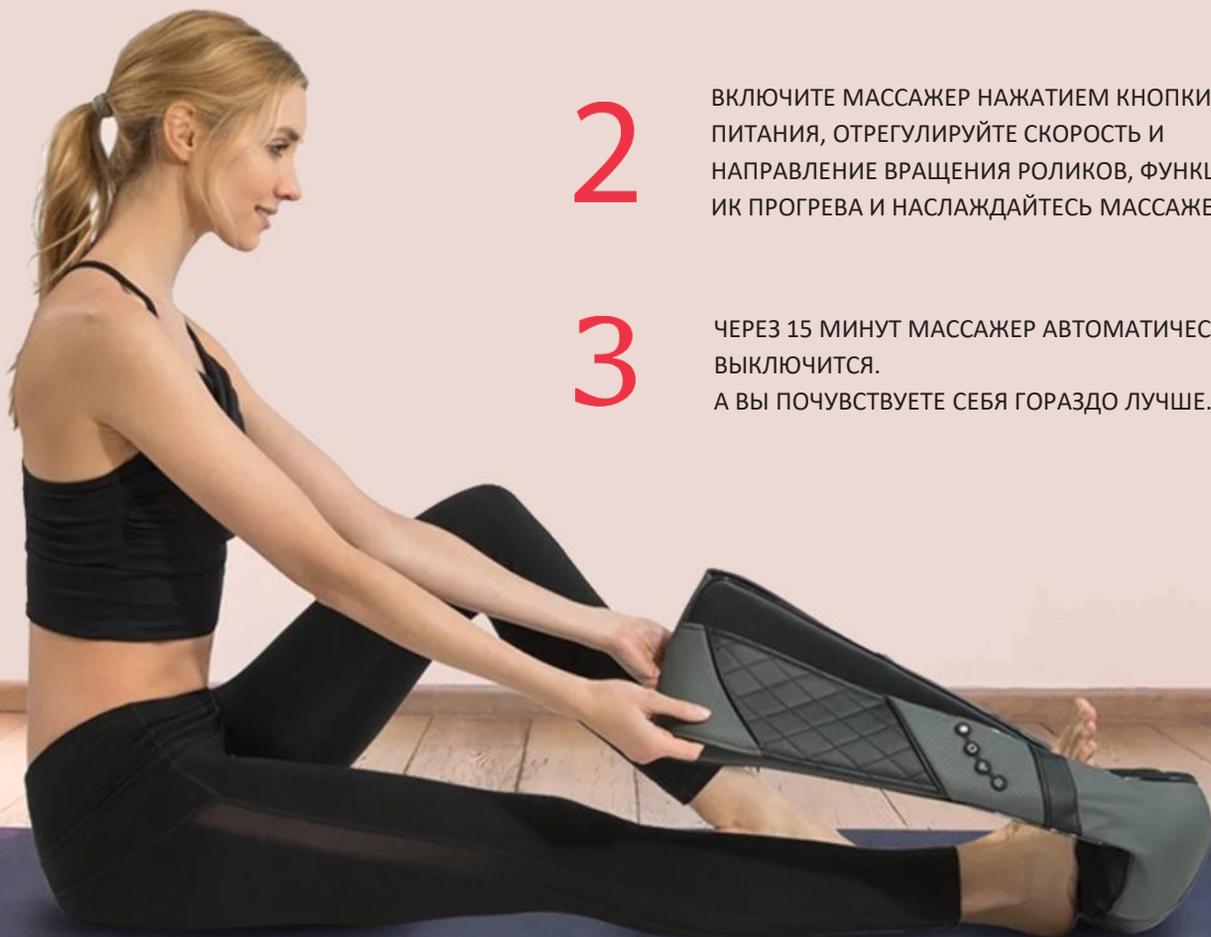

НА РАБОТЕ



ДОМА

В
АВТОМОБИЛЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ*



РЕЗУЛЬТАТЫ МАССАЖА ОЩУЩАЮТСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ 15 МИНУТ. ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ МАССАЖЕРА МОЖНО ЗАБЫТЬ ОБ ОНЕМЕНИИ, СКОВАННОСТИ И УСТАЛОСТИ В МЫШЦАХ, ЛОМОТЕ В ШЕЕ, ПЛЕЧАХ И СПИНЕ, МОДЕЛИРОВАТЬ ФИГУРУ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ. ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖЕРА ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТРЕССА И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СНА.



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ
В МЫШЦАХ



УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
СПИНЕ



УЛУЧШЕНИЕ
ОБЩЕГО
САМОЧУВСТВИЯ



УЛУЧШЕНИЕ
ОСАНКИ



СОКРАЩЕНИЕ
БОЛЕЙ В НОГАХ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
МЫШЦАХ ШЕИ И ПЛЕЧ



ПРОФИЛАКТИКА
ГОЛОВНОЙ БОЛИ



КОРРЕКЦИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА



УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
СНА


** Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНКОВ .
- МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ И РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖИ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИ НАЛИЧИИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВРАЧА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

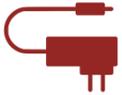

СЕТЕВОЙ
АДАПТЕР



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
АДАПТЕР



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: DC 12 В
Сетевой адаптер AC 220 - 240 В, 50 -60 Гц
/DC12 В, 2 А
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 24 Вт
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ: 15 минут

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ
СЕРИИ AMG, модель AMG 395 - 1 шт.
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР - 1 шт.
АДАПТЕР ОТ «ПРИКУРИВАТЕЛЯ» АВТОМОБИЛЯ-1 шт.
СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 шт.
УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА -1 шт.



МАССАЖЕР
УПАКОВАН В КОРОБКУ