

GÉZATONE

ПЕРКУССИОННЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

AMG 140


РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ

ОБЛЕГЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ БОЛИ



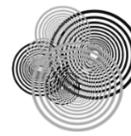

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА, СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, - ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В МЫШЦАХ БОЛИ, СКОВАННОСТИ, ОНЕМЕНИЯ, СПАЗМОВ. ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР **GEZATONE AMG140** УСТРАНЯЕТ НЕГАТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И ДИКОМФОРТ, ВОЗВРАЩАЯ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ.




- БОЛЬ И МЫШЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ. НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВОК. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.



- СПАЗМЫ В МЫШЦАХ, ГИПЕРТОНУС И БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В СУСТАВАХ МЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ. АТРОФИЯ МЫШЦ.



- ОНЕМЕНИЕ И СКОВАННОСТЬ МЫШЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕПОДВИЖНОСТИ И НЕПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКЕ.

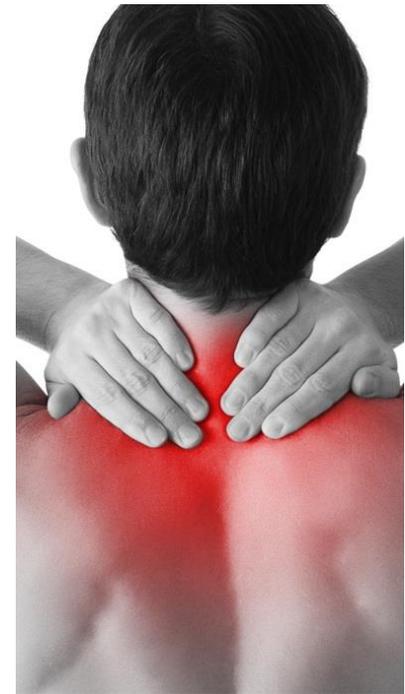

- ДИСКОМФОРТ ПРИ СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ И МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. НЕДОСТАТОЧНЫЙ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ.



ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ



Арт. 1301275

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ ОСНОВАН НА СЕРИИ БЫСТРЫХ УДАРОВ «ПОСТУКИВАНИЙ», ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИХ В МЯГКИЕ ТКАНИ. СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛИ, РАССЛАБЛЕНИЮ МЫШЦ И БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ. МАССАЖ УЛУЧШАЕТ КРОВОТОК, ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УВЕЛИЧИВАЕТ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ МЫШЦ.

- МАССАЖЕР ОКАЗЫВАЕТ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ТОЧЕЧНОЕ **ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТИ АПРЯЖЕНИЯ МЫШЦ**, МЯГКИЕ ТКАНИ НУЖДАЮТСЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОБЛАСТИ, ГДЕ ЕСТЬ УЧАСТКИ ЛОКАЛЬНОГО МЫШЕЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ.
- МНОГОКРАТНО УДАРЯЯ ПО МЫШЦАМ, **АППАРАТ ОКАЗЫВАЕТ РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ** НЕ ТОЛЬКО НА МЫШЦЫ НО И НА ИХ ОБОЛОЧКИ – ФАСЦИИ. ПРИ ЭТОМ ПРИБОР ОКАЗЫВАЕТ **БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ** ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕМ ПРИ МАНУАЛЬНОМ МАССАЖЕ.



УСТРАНЕНИЕ
БОЛИ В МЫШЦАХ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМА И
СКОВАННОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ
И ПИТАНИЯ




ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОК



ВЫВЕДЕНИЕ
ТОКСИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ ОБМЕНА




УСТРАНЕНИЕ
УСТАЛОСТИ

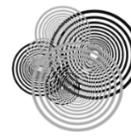


ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН МАССАЖЕР


ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG 140 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА:

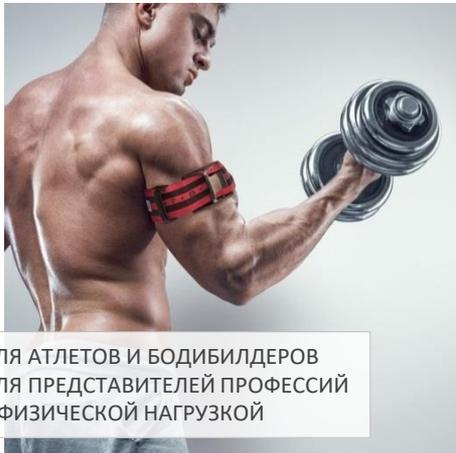


ДЛЯ АТЛЕТОВ И БОДИБИЛДЕРОВ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ
С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

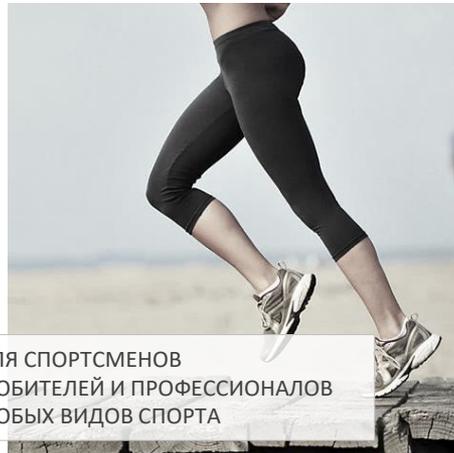


ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЛЮБЫХ ВИДОВ СПОРТА

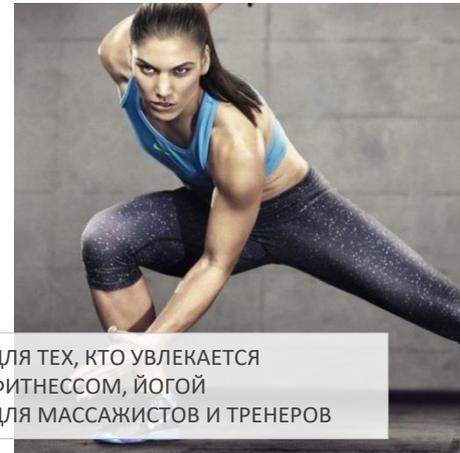


ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ
ФИТНЕССОМ, ЙОГОЙ
ДЛЯ МАССАЖИСТОВ И ТРЕНЕРОВ

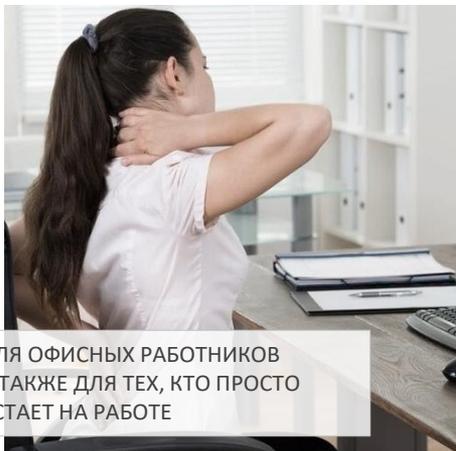

ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОСТО
УСТАЕТ НА РАБОТЕ

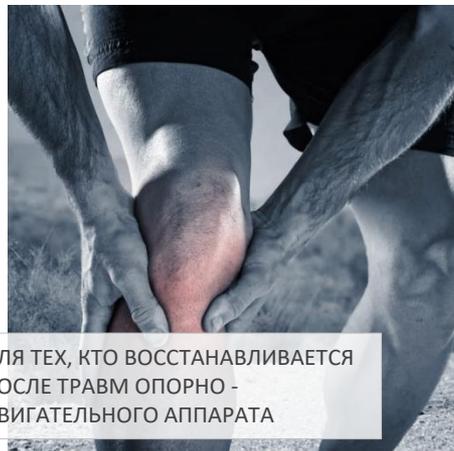

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ ТРАВМ ОПОРНО -
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

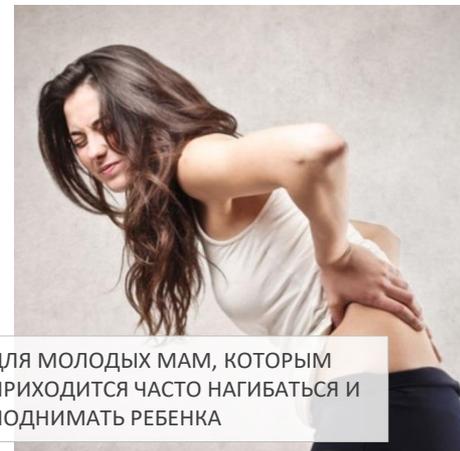

ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ, КОТОРЫМ
ПРИХОДИТСЯ ЧАСТО НАГИБАТЬСЯ И
ПОДНИМАТЬ РЕБЕНКА



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301275

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** для мужчин и женщин
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: **СЕАНС МАССАЖА ЗА 15 МИНУТ** ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ДИСКОМФОРТА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА МАССАЖ И СПЕШИТЬ К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ
- **НАСАДКИ** для воздействия на группы мышц обладают высокой износостойкостью и **ЛЕГКО МОЮТСЯ**
- НАЛИЧИЕ **АККУМУЛЯТОРА** ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ И БЫТЬ ПРИВЯЗАННЫМ К ОДНОМУ МЕСТУ
- **6 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ** ОТ 2100 ДО 3300 УДАРОВ В МИНУТУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТИ, БОЛИ, СПАЗМОВ И ТРИГГЕРОВ В МЫШЦАХ
- БЛАГОДАРЯ ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЕ, ПРИБОР **УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ**
- **УПРАВЛЕНИЕ** МАССАЖЕРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ **ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ** И НЕ ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
- ЭТОТ АППАРАТ **ВСЕГДА ПОД РУКОЙ:** В СПОРТЗАЛЕ, В ОФИСЕ, В ПОЕЗДКЕ И ДОМА. МОЖНО ДЕЛАТЬ МАССАЖ, НЕ СНИМАЯ ОДЕЖДУ.



6 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



СЕАНС
15 МИНУТ



УДОБНО
ДЕРЖАТЬ В
РУКЕ



УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ
НА ТРЕНИРОВКУ
И В ПОЕЗДКУ



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



4 НАСАДКИ В
КОМПЛЕКТЕ



МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

4 НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРКУССИОННОГО МАССАЖА

НАСАДКИ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУППЫ МЫШЦ И ОТДЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ.

● ШАРОВИДНАЯ
НАСАДКА



НАСАДКА ДЛЯ МАССАЖА
БОЛЬШИХ ГРУПП МЫШЦ

● ПЛОСКАЯ
НАСАДКА



НАСАДКА ДЛЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЛЮБУЮ ОБЛАСТЬ ТЕЛА И
НЕБОЛЬШИХ ГРУПП МЫШЦ

● КОНУСОВИДНАЯ
НАСАДКА «ПУЛЯ»



НАСАДКА ДЛЯ
«РАЗБИВАНИЯ» ТРИГГЕРОВ,
ПРОРАБОТКИ ТКАНЕЙ И
ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА СТОП

● U ОБРАЗНАЯ
НАСАДКА «ВИЛКА»



НАСАДКА ДЛЯ МАССАЖА
МЫШЦ ШЕИ, ТРАПЕЦИИ, И
МЫШЦ ВДОЛЬ
ПОЗВОНОЧНИКА

НАСАДКИ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУППЫ МЫШЦ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И ЛЕГКО МОЮТСЯ



ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ИСПОЛЬЗУЯ МАССАЖЕР AMG 140, МОЖНО ПРОВОДИТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МАССАЖА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ
УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ
ТРЕНИРОВКИ

РАЗОГРЕВ ПЕРЕД
ТРЕНИРОВКОЙ

ОБЛЕГЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕННЫХ
ОЩУЩЕНИЙ





МАССАЖ МОЖНО ПРОВОДИТЬ, НЕ СНИМАЯ ОДЕЖДУ

ВКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР
УСТАНОВИТЕ САМЫЙ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ.

АККУРАТНО ПРИСЛОНИТЕ
К ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ СИЛУ
И НЕ ДАВИТЕ.


ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАССАЖЕР
СКОльзящим ДВИЖЕНИЕМ,
МЕДЛЕННО И ПЛАВНО.
ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЙТЕ
УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ.

В ЗОНЕ МЫШЕЧНОГО
УПЛОТНЕНИЯ (НА
ТРИГГЕРНОЙ ТОЧКЕ),
ЗАДЕРЖИТЕ МАССАЖЕР В
ТЕЧЕНИЕ 10 – 15 СЕКУНД.

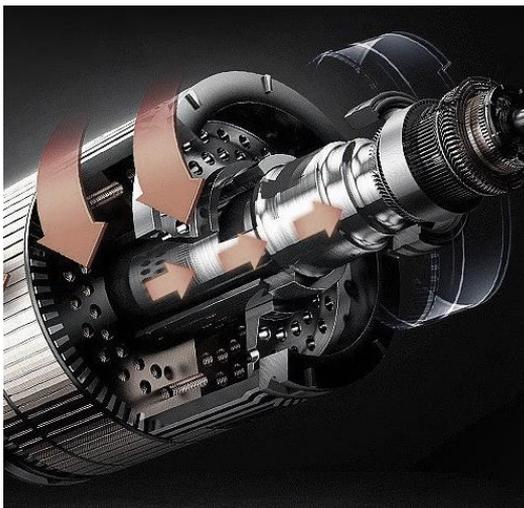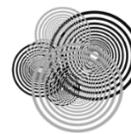

РЕЗУЛЬТАТЫ

- УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ.
- УСТРАНЕНИЕ БОЛИ И МЫШЕЧНОЙ УСТАЛОСТИ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
- РАССЛАБЛЕНИЕ СПАЗМИРОВАННЫХ И ЗАЖАТЫХ МЫШЦ.
- УЛУЧШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ.
- УСКОРЕНИЕ ПЕРИОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ.
- ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК.
- «РАЗОГРЕВ» МЫШЦ ПЕРЕД ЗАНЯТИЯМИ СПОРТОМ И СИЛОВЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ И УСТРАНЕНИЕ УСТАЛОСТИ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ ТРУДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ.

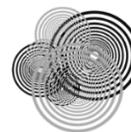

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН, ТРОМБОФЛЕБИТ
- ТРАВМЫ, ПЕРЕЛОМЫ, РАСТЯЖЕНИЯ
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СКОРОСТЬ СВЕРТЫВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301275



- ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА: 1800 mAh
- ПАРАМЕТРЫ АДАПТЕРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ: DC 8.4 V / 1A
- ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: 1,5-2 ч
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: около 3 часов
- АМПЛИТУДА ДВИЖЕНИЙ МАССАЖНОЙ ГОЛОВКИ: 12 мм
- УРОВЕНЬ ШУМА: от 44 дБ
- РАЗМЕР : 220x218x50 мм
- ВЕС: ~ 1,1 кг

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • 1 уровень – 2100 ударов / мин | • 4 уровень – 2800 ударов / мин |
| • 2 уровень – 2300 ударов / мин | • 5 уровень – 3100 ударов / мин |
| • 3 уровень – 2600 ударов / мин | • 6 уровень – 3300 ударов / мин |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG140 GEZATONE – 1
- 4 СМЕННЫХ НАСАДКИ
- ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО – 1
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1