


АППАРАТ  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ЧИСТКИ ЛИЦА



BIO Sonic 1007

**GÉZATONE**

инструкция по применению

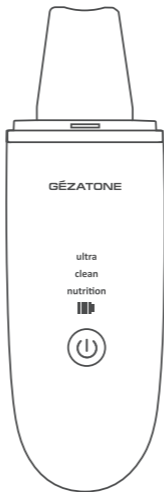

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	2
Методики, используемые в приборе.....	3
Общее описание аппарата.....	4
Меры безопасности.....	5
Показания.....	7
Противопоказания.....	8
Подготовка аппарата к работе.....	9
Управление прибором.....	11
Проведение процедур.....	13
Рекомендации по уходу.....	21
Обслуживание аппарата.....	23
Технические характеристики.....	24
Комплектация.....	25

## ВВЕДЕНИЕ

Аппарат Gezatone **Bio Sonic 1007** позволяет осуществлять комплексный уход за кожей на основе современных эффективных методик с использованием ультразвука, не подвергая кожу сдавливанию, растяжению и механическому повреждению верхних слоев. При помощи аппарата можно проводить косметологические процедуры по очищению, стимуляции регенерации кожи, повышению ее эластичности, пилингу перед антицеллюлитными процедурами.

Принцип действия аппарата основан на генерации ультразвукового сигнала с частотой 24 кГц, вызывающего невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата – тонкой металлической лопаточки.



## МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИБОРЕ

### **Ультразвуковой пилинг**

Эффективно очищает, устраняет загрязнения с поверхности и из пор, удаляет отмершие клетки с поверхности кожи.

### **Ультразвуковой фонофорез и микромассаж**

Усиливает проникновение активных компонентов косметических средств, активизирует синтез коллагена, стимулирует микроциркуляцию и восстановительные процессы. Повышает тонус и плотность кожи, способствует восстановлению уровня увлажненности кожи.

### **Дезинкрустация (ионное очищение)**

Обеспечивает глубокое очищение кожи, устраняет комедоны и избыток секрета сальных желез, улучшает цвет лица и способствует сокращению пор.

### **Микротоковая терапия**


Оказывает стимулирующее действие на уровне клеток, восстанавливая их энергетический потенциал. Оказывает воздействие на микроциркуляцию и лимфоток. . Делает кожу более плотной, эластичной, улучшает цвет лица.

### **Хромотерапия (LED терапия)/синий свет (длина волны $465\pm 3$ нм)**

Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, обладает антибактериальными свойствами. Помогает уменьшить раздражение кожи.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Ультразвуковой аппарат Gezatone **Bio Sonic 1007** состоит из электронного блока с встроенным ультразвуковым преобразователем (щупом) с рабочим инструментом в виде металлической лопаточки трапецевидной формы. При выборе режима работы на передней панели подсвечивается соответствующий индикатор. В ждущем режиме медленно мигают все 3 индикатора режимов. Внешний вид аппарата приведен на Рис. 1

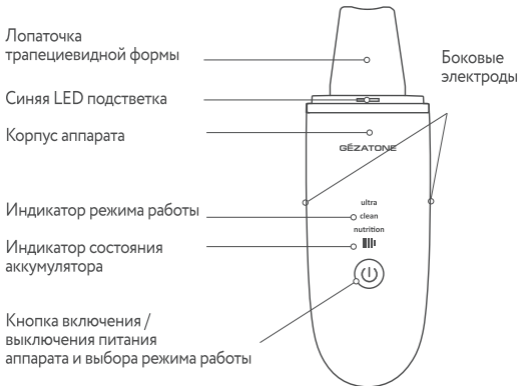

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА **Bio Sonic 1007**

Рис. 1

Внешний вид панели управления аппарата **Bio Sonic 1007** приведен на Рис. 2.

Режим **ULTRA** (ультразвуковое воздействие:  
пилинг, фонофорез, микромассаж)

Режим **CLEAN** для интенсивного глубокого  
очищения (ультразвук + ионное очищение)

Режим **NUTRITION** для питания и укрепления  
кожи (ультразвук + микротоки)

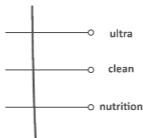


Рис. 2

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аппарат **Gezatone Bio Sonic 1007** достаточно прост в использовании, однако, необходимо соблюдать требования по работе с аппаратом.

### **Внимание:**

- Аппарат рассчитан на питание от встроенного аккумулятора. Для зарядки используйте идущий в комплекте USB кабель. Перед подключением кабеля к сети убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений изоляции.

- Проводите регулярную проверку состояния металлической лопаточки ультразвукового щупа.

При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности лопаточки дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки поверхности лопаточки.

- После внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования.
- Во время проведения процедуры на аппарате Gezatone Bio Sonic 1007 запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
- Запрещается работать ультразвуковым щупом по сухой коже. Для процедуры используйте специальные косметические средства. Не рекомендуется многократно обрабатывать лопаточкой один и тот же участок кожи. Количество повторных движений по одной зоне лица – не более четырех. Во время процедуры не останавливайтесь лопаточкой на одном месте.
- Выключайте питание аппарата на время перерывов в работе, если их продолжительность превышает 30 сек.
- Обращайтесь со щупом аккуратно. Не подвергайте его ударам, перегреву во время использования, не перекручивайте и не дергайте за соединительный провод во время зарядки аккумулятора.
- Запрещается погружать щуп в любую жидкость.
- После использования аппарата в течение 10 мин. необходимо сделать перерыв не менее чем на 20 мин., чтобы аппарат остыл.
- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Перед и после процедуры очищайте рабочую поверхность металлической пластины щупа 70% раствором спирта.
- Не нажимайте на кнопку управления аппаратом острыми предметами или кончиками ногтей.
- Храните аппарат вдали от нагревательных приборов и в защищенном от солнечных лучей месте.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА **Bio Sonic 1007**



- Держите прибор подальше от огня.
- Использование прибора детьми возможно только в возрасте от 16 лет и под наблюдением взрослых. Людям с ограниченными физическими и умственными возможностями перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с устройством и возможными рисками.
- Не рекомендуется бросать, разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство.
- Полностью зарядите аппарат перед первым использованием. Корпус аппарата водонепроницаемый, прибор не боится попадания брызг, однако, не рекомендуется помещать его под струю воды или использовать при принятии душа. Корпус зарядной базы не является влагопроницаемым. Запрещено заряжать аккумулятор в помещениях с повышенной влажностью.
- Аппарат можно протирать мягкой тканью, слегка смоченной нейтральным моющим средством для пластмасс.
- Не разбирайте аппарат! Сервисное обслуживание аппарата должно проводиться только в специализированных центрах.
- В случае необходимости ремонта обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

**Внимание!** Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за возможные последствия применения аппарата, вызванные нарушением правил эксплуатации или не соблюдением методик проведения процедур.

## ПРИ КАКИХ ПРОБЛЕМАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ:

- Повышенное салоотделение
- Жирная и смешанная кожа
- Загрязнения в порах и на поверхности кожи, комедоны

- Сниженный тонус кожи, расширенные поры
- Недостаток влаги, шелушение
- Рубцы постакне, поствоспалительная пигментация
- Возрастные изменения кожи и профилактика преждевременного старения
- Морщины
- Отеки, пастозность
- Неровный тон кожи, тусклый цвет лица
- Грубая, ороговевшая кожа

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия)
- Недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- Болезни крови, тромбофлебиты
- Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов
- Онкологические заболевания кожи
- Нарушение целостности кожных покровов
- Острые воспалительные и гнойные процессы
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов
- Психические заболевания
- Период беременности

- Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые и пр. нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты.
  - Плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение процедуры)
- Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: глаза, область над сердцем и щитовидной железой, половые органы, над силиконовыми имплантатами, областях с гелевой контурной пластикой.

## ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

### Подготовка

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что металлическая лопаточка щупа не имеет повреждений и острых сколов.

## ЗАРЯДКА ПРИБОРА

При низком уровне заряда загорается красный индикатор и устройство отключается.

**Зарядка от компьютера:** включите компьютер и затем поместите устройство на зарядную базу и убедитесь, что все контакты совпадают. Подключите кабель USB к компьютеру, начнётся зарядка. Во время зарядки будет мигать красный индикатор. По окончании зарядки будет непрерывно гореть голубой индикатор.

Во время зарядки мигает красный индикатор.



После окончания зарядки загорится голубой индикатор.



Рис. 3

### **Зарядка прибора от розетки:**

Подсоедините прибор с помощью кабеля к адаптеру (в комплект не входит), затем подсоедините адаптер в розетку. Световой индикатор работает так же, как и в режиме зарядки от компьютера.

Рекомендуемые параметры адаптера питания:

Напряжение выходное: DC 5В

Напряжение входное AC 220В 50 Гц

Ток выходной: не менее 500 мА

Разъем выходной: USB, тип А

### **ВНИМАНИЕ!**

**Зарядная база прибора не защищена от влаги, поэтому зарядка прибора во влажных помещениях не допускается.**

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ:



### 1. Режим ожидания:

Нажмите кратковременно один раз кнопку на передней панели прибора, чтобы включить прибор и перейти в ждущий режим. Подсветка всех 3-х режимов: «ultra», «clean», «nutrition» будет плавно загораться и гаснуть.



### 2. Ультразвуковой пилинг:

Еще раз нажмите кнопку на передней панели, чтобы войти в этот режим. Вы услышите непрерывный звук высокочастотной вибрации, индикатор «ultra» будет гореть непрерывно.



### 3. Ультразвуковой фонофорез и микромассаж:

Нажмите кнопку на передней панели прибора в третий раз, чтобы войти в этот режим. Вы услышите прерывистый звук высокочастотной вибрации и индикатор «ultra» будет мигать.



### 4. Глубокое очищение

#### (ультразвук + дезинкрустация):

Нажмите кнопку на передней панели прибора четвертый раз, чтобы войти в этот режим. Вы услышите непрерывный звук высокочастотной вибрации и индикатор «clean» будет гореть непрерывно. При работе в этом режиме необходимо чтобы пальцы находились на металлических пластинах по бокам прибора.



## 5. Режим питания и укрепления кожи (ультразвук + микротоки) :

Нажмите кнопку на передней панели прибора пятый раз, чтобы войти в режим Nutrition. Вы услышите непрерывный звук высокочастотной вибрации. При работе в режиме Nutrition во время процедуры необходимо, чтобы пальцы находились на металлических контактных пластинах по бокам прибора.



## 6. Повторный переход в режим ожидания:

Нажмите кнопку на передней панели шестой раз, при этом все индикаторы будут плавно загораться и гаснуть, прибор опять перейдет в режим ожидания.



**7. Находясь в любом режиме,** нажмите и удерживайте кнопку на передней панели прибора примерно 2 сек, чтобы выключить прибор. Также устройство имеет встроенный таймер и отключится автоматически через 10 минут работы.

Если при нахождении прибора в режиме ожидания не производить никаких действий, прибор отключится автоматически через 2 мин.

## ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР

### Ультразвуковой пилинг режим *ultra* / непрерывный

Эффективно очищает кожу, удаляет отмершие клетки, очищает поры от кожного сала и загрязнений, подготавливает к введению косметических средств. Для проведения процедуры необходимо использовать специальное косметическое средство.

#### Рекомендуемые косметические средства:

Гель для УЗ пилинга «Ультраклин Сенс». Разработан для бережного деликатного очищения сухой, тонкой и чувствительной кожи, а также для нормальной кожи с тенденцией к сухости. Формула геля усиливает очищающий эффект ультразвуковой волны, снижает риск возникновения раздражения, не травмирует кожу. Гель для уз пилинга «Ультраклин Контроль». Разработан для тщательного очищения комбинированной, жирной, пористой кожи, а также для нормальной кожи с тенденцией к гиперпродукции кожного сала. Формула геля снижает воспаление, усиливает очищающее действие ультразвука.

#### Проведение процедуры.

1. Включите аппарат. Снимите с щупа защитный колпачок.
2. Начните проведение процедуры чистки. В этой процедуре щуп должен быть обращён вверх выпуклым углом на металлической пластине, а конец пластины должен располагаться примерно под углом  $45^{\circ}$  к поверхности кожи (рис. 4).
3. Выберите режим "Ultra".

## **Ультразвуковой фонофорез и микромассаж режим ultra / импульсный**

Усиливает проникновение компонентов косметических средств и повышает их эффективность. Тонизирует и укрепляет кожу, способствует сокращению отечности и уменьшению расширенных пор. Улучшает цвет лица и устраняет признаки усталости. Для проведения процедуры необходимо использовать специальное косметическое средство.

### **Рекомендуемые косметические средства:**

Гель с экстрактом икры. Повышает уровень увлажненности, укрепляет, увлажняет и тонизирует кожу. Рекомендуется для всех типов кожи для восстановления состояния кожи и профилактики преждевременного старения.

Гель активный «Аква-гель алоэ-вера». Оказывает увлажняющее, тонизирующее, освежающее и успокаивающее действие. Стимулирует процессы регенерации, делает кожу нежной, упругой и гладкой, уменьшает воспаление.

### **Проведение процедуры.**

Нажмите 3 раза на кнопку на передней панели прибора. Индикатор Ultra будет мигать. Нанесите гель тонким слоем на сухую кожу при помощи кисти, по зонам.

Сначала нанесите на одну зону лица обработайте эту зону аппаратом, продолжите процедуру на другой зоне. Держите лопатку выпуклой стороной вниз под углом  $45^{\circ}$  (рис. 5).

Воздействие осуществляется по массажным линиям, от центра к периферии.



## Глубокое очищение (ультразвук + дезинкрустация) режим clean

Сочетает две методики для глубокого и тщательного очищения кожи: ультразвуковой пилинг и ионное очищение (дезинкрустацию). Суть дезинкрустации заключается в омылении жирных кислот кожного сала при участии гальванического тока в сочетании со специальным лосьоном-дезинкрустантом. Лосьон для дезинкрустации дополняет действие тока и является проводящей средой.

**! ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ CLEAN ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПАЛЬЦЫ НАХОДИЛИСЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ ПЛАСТИНАХ ПО БОКАМ ПРИБОРА.**

### **Рекомендуемые косметические средства:**

Лосьон «Дезинкрустант». Способствует глубокому очищению кожи, устраняет избыток кожного сала и загрязнения, регулирует процессы салоотделения. Обеспечивает размягчение комедонов и облегчает их удаление.

### **Проведение процедуры:**

1. Включите аппарат.
2. Выберите режим "Clean"
3. Начните проведение процедуры. В этой процедуре щуп должен быть обращен вверх выпуклым углом на металлической пластине, а конец пластины должен располагаться примерно под углом  $45^{\circ}$  к поверхности кожи (рис. 4)

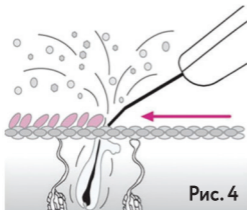


Рис. 4

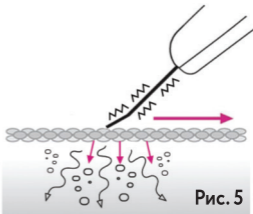


Рис. 5

4. Выполняйте процедуру чистки плавными движениями, направленными от боковых поверхностей лица к его центру против роста волос (рис. 6А).

Количество последовательных проходов щупом не должно превышать четырех раз для одного участка кожи. Комедоны удаляются мелкими, но более интенсивными движениями. Периодически очищайте поверхность металлической пластины щупа от избытка жидкости с помощью салфетки. При возникновении жжения или чрезмерном ощущении тепла нужно увеличить количество лосьона.

5. После завершения процедуры уберите избытки лосьона с кожи при помощи салфеток.

6. Очистите поверхность щупа салфеткой и аккуратно обработайте металлическую пластину 70% спиртовым раствором, не допуская его попадания внутрь пластиковой ручки. Закройте рабочую поверхность щупа защитным футляром.

## **Питание и укрепление кожи (ультразвук +микротоки) режим nutrition**

Сочетает две методики для интенсивного корректирующего воздействия на кожу: ультразвук и микротоковая терапия. В данном режиме ультразвуковая волна генерируется непрерывно, что позволяет вводить активные вещества дополнительно к микромассажу и микротоковому воздействию. В режиме микромассажа с постоянной генерацией ультразвука (индикатор не мигает, что говорит о высокой интенсивности воздействия) происходит комбинация вибромассажа с тепловым воздействием, что обеспечивает эффективное снятие мышечного спазма с мимических мышц, расширение сосудов, активизацию мимических мышц, расширение сосудов, активизацию обменных процессов в коже и мышцах, обогащение кожи питательными веществами и кислородом, увлажнение кожи, а также эффект размягчения и выравнивания посттравматических рубцов и инфильтратов.

**! ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ NUTRITION ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПАЛЬЦЫ НАХОДИЛИСЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ ПЛАСТИНАХ ПО БОКАМ ПРИБОРА.**

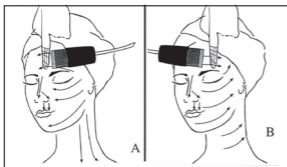


Рис. 6

### Рекомендуемые средства:

Гель активный «Кислородный гель с гиалуроновой кислотой». Универсальный гель для всех типов кожи, стимулирует процессы оксигенации, интенсивно увлажняет и насыщает питательными веществами. Повышает тонус и эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина. Усиливает защитные свойства, замедляет процессы старения и оказывает антиоксидантное действие.

Гель активный «Аква-гель алоэ-вера». Оказывает увлажняющее, тонизирующее, освежающее и успокаивающее действие. Стимулирует процессы регенерации, делает кожу нежной, упругой и гладкой.

**Проведение процедуры:**

1. Включите аппарат. Выберите режим Питание (Nutrition). Нанесите гель тонким слоем на сухую кожу при помощи кисти, по зонам. Сначала нанесите на одну зону лица, обработайте эту зону аппаратом, продолжите процедуру на другой зоне. Во время процедуры необходимо, чтобы пальцы находились на металлических контактных пластинах по бокам прибора.

2. Воздействие осуществляется плоской частью на конце металлической лопаточки щупа плавными движениями по массажным линиям: снизу вверх, от середины лица к его наружной части (рис. 6B). Количество последовательных проходов щупом не должно превышать трех раз на одну зону. Особое внимание уделяется зонам с морщинами, рубцами, инфильтратами, постакне.

3. Очистите поверхность щупа салфеткой и аккуратно обработайте металлическую лопаточку 70% спиртовым раствором, не допуская его попадания внутрь пластиковой ручки.

**Процедуры проводятся** 2-3 раза в неделю, курсом по 10-20 процедур. Рекомендуется плавно увеличивать интенсивность процедур в течение одного курса. Курсы процедур проводят 1-2 раза в год. Между курсами желательно проведение поддерживающих процедур один раз в месяц.

## КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ НА АППАРАТЕ GEZATONE BIO SONIC 1007

Для максимальной эффективности воздействия рекомендуется грамотно сочетать технологии, используемые в приборе.

Регулярный уход подразумевает очищение, питание с использованием гальванических токов (ионофорез) и стимуляцию естественных процессов омоложения (лифтинг). Такое сочетание сделает кожу сияющей и молодой.

**Дезинкрустация** в рамках регулярного ухода проводится 1-2 раза в неделю.

Интенсивный уход включает в себя дезинкрустацию, УЗ-пилинг и УЗ-массаж. Активное взаимодействие методик и косметических препаратов глубоко и бережно очищает кожу, устраняет следы возраста, разглаживает морщины и повышает тонус кожи.

УЗ-пилинг и УЗ-микромассаж проводятся активными курсами из 10-15 процедур не чаще 2 раз в неделю.

Перед ультразвуковым очищением допустимо проводить дезинкрустацию, чтобы повысить эффективность процедуры.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД				
	Курс	ULTRA УЗ пилинг	CLEAN дезинкру- стация + УЗ	ULTRA УЗ фонофорез микромассаж	NUTRITION питание и укрепление
Жирная кожа Расширенные поры	1-2 раза в неделю 4 недели	Очищающий гель «Ультраклин Контроль»	Лосьон «Дезин- крустант»	Гель активный "Аква-гель Алоэ-Вера"	Гель активный "Аква-гель Алоэ-Вера"
Сухая кожа	1 раз в неделю 3-4 недели	Очищающий гель "Ультраклин сенс"	Не проводится	Сыворотка для лица с коллагеном "Гидролизат коллагена"	Гель активный с экстрактом икры
Увядающая кожа, морщины	1-2 раза в неделю 4-6 недель	Очищающий гель "Ультраклин сенс"	Не проводится	Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой "Гиалуроновая кислота 2%"	Гель активный "Ультралифт"
Чувстви- тельная тонкая кожа	1 раз в неделю 3-4 недели	Очищающий гель "Ультраклин сенс"	Не проводится	Гель активный с экстрактом икры	Гель активный "Кислородный гель с гиалуро- новой кислотой"
Пигментация, неровный кожный рельеф	1-2 раза в неделю 4 недели	Очищающий гель «Ультраклин Контроль»	Лосьон «Дезин- крустант»	Гель активный "Аква-гель Алоэ-Вера"	Гель активный "Кислородный гель с гиалуро- новой кислотой"

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД			
	ULTRA УЗ пилинг	CLEAN дезинкрустация + УЗ	ULTRA УЗ фонофорез микромассаж	NUTRITION питание и укрепление
Жирная кожа Расширенные поры	1 раз в 2 недели Очищающий гель «Ультраклин Контроль»	1 раз в 2 недели Лосьон «Дезинкрустант»	Гель активный Алоэ-Вера"	"Аква-гель
Сухая кожа	1 раз в 2 недели Очищающий гель "Ультраклин сенс"	Не проводится	1 раз в 2 недели Гель активный с экстрактом икры	
Увядающая кожа, морщины	1 раз в 2 недели Очищающий гель "Ультраклин сенс"	Не проводится	1 раз в неделю Гель активный "Ультралифт"	
Чувстви- тельная тонкая кожа	1 раз в 2 недели Очищающий гель "Ультраклин сенс"	Не проводится	1 раз в 2 недели Гель активный "Кислородный гель с гиалуроновой кислотой"	
Пигментация, неровный кожный рельеф	1 раз в 2 недели Очищающий гель «Ультраклин Контроль»	1 раз в 2 недели Лосьон «Дезинкрустант»	1 раз в неделю Гель активный "Аква-гель Алоэ-Вера" или Гель активный "Кислородный гель с гиалуроновой кислотой"	



## ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлической лопатки ультразвукового щупа при помощи мягкой салфетки, увлажненной 70% раствором спирта. После обработки включите щуп на несколько (10-15) секунд, а затем протрите насухо чистой салфеткой. Периодически протирайте корпус аппарата мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством.

**Внимание!** Антисептическое средство не должно попадать внутрь пластикового корпуса щупа или аппарата. Используйте салфетки с умеренным количеством жидкости.

### **Запрещается:**

- Погружать корпус аппарата в любую жидкость (раствор, спирт или воду).
- Использовать для протирки ультразвукового щупа и корпуса аппарата агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким волокном или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат и металлическую лопаточку сильным ударам.

Внутри электронного блока аппарата Gezatone Sio Sonic 1007 нет компонентов или частей, требующих обслуживания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука.....24 кГц  
Выходная мощность у/з колебаний.....не более 0,8 Вт/см<sup>2</sup>

### Выходные параметры сигналов:

**Ultra:** ультразвуковые колебания с частотой..... 24кГц

**Clean:** ультразвуковые колебания с частотой.....24 кГц

Пачки импульсов с амплитудой -7В и частотой 100Гц

Частота пачек импульсов .....1 Гц

**Nutrition:** ультразвуковые колебания с частотой..... 24кГц

Пачки импульсов с амплитудой +7В и частотой 100Гц

Частота пачек импульсов .....1 Гц

Напряжение питания,

тип встроенного аккумулятора.....3,7В 600мАч Li-Pol

Время зарядки (среднее)..... 2 часа

Время непрерывной работы при полной зарядке .....1 ч

Выходные параметры зарядного устройства

(в комплект не входит).....DC 5В, не менее 500мА

Разъем USB .....тип А

Допустимая влажность.....не более 70 %

Диапазон рабочих температур .....+15...+35 градусов

Подсветка синим светом, длина волны..... 465±3 нм

Вес прибора.....205 г

Габариты в упаковке.....90x210x90

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ультразвуковой прибор Bio Sonic 1007.....	1 шт
Зарядная база.....	1 шт
USB кабель.....	1 шт
Инструкция.....	1 шт
Гарантийный талон.....	1 шт

### **Утилизация:**

не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!

# GEZATONE



**Прибор для ухода и массажа лица, серия Bio Sonic,  
модель 1007 бытовой электрический, торговой марки GEZATONE.**

Изготовитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges  
Galand, France, / Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Филиал завода-изготовителя: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ  
ПРОДАКТС МФГ. ИНК" адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan  
R.O.C., / 2фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань.

Импортер/уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», РФ,  
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком 8. Тел. 8(495)225-25-83.

Срок службы: 3 года. Способ применения и дату производства: см. инструкцию.