


ARG

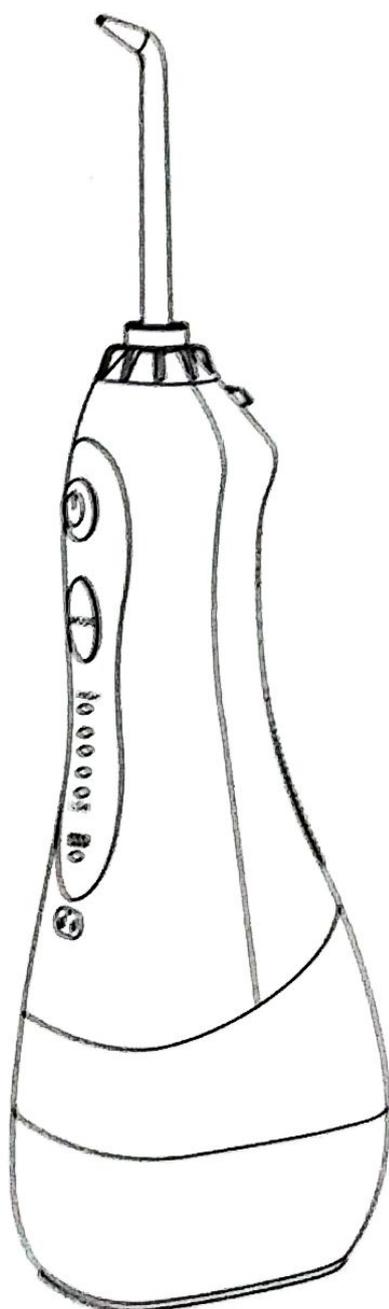


Портативный ирригатор

HF-6

Спасибо за покупку Портативный ирригатор ARG HF-6. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Модель	HF-6	Ввод	5V 1A
Материал	ABS, PC	Диапазон давления воды	40-110 psi
Время зарядки	3-5 часов	Уровень	IPX7
Емкость резервуара	300ML	Способ подачи воды	Пульсирующая вода

Схема

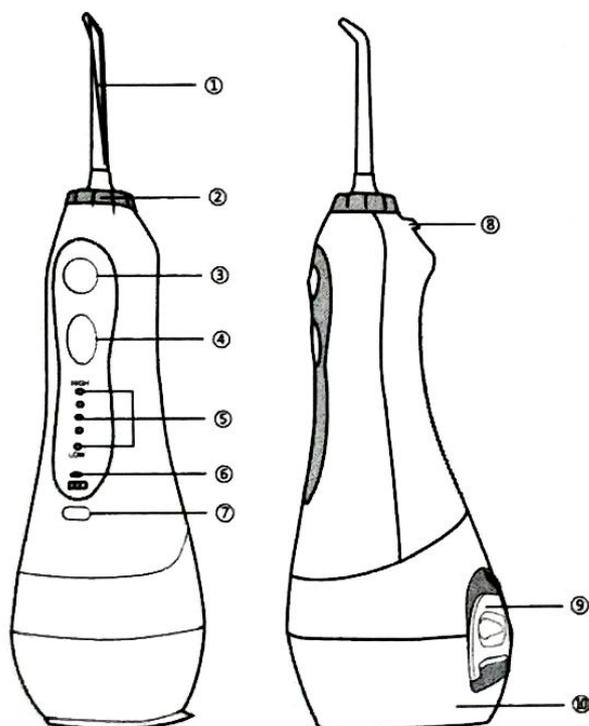

1. Насадка
2. Регулятор поворота насадки
3. Кнопка включения/выключения
4. Кнопка выбора режима
5. Индикаторы режимов
6. Индикатор зарядки
7. Порт для зарядки
8. Кнопка снятия насадки
9. Крышка резервуара для воды
10. Резервуар для воды

Аксессуары



USB-кабель для зарядки

Скребок для языка

Ортодонтическая насадка

Пародонтальная насадка

Стандартная насадка

Назальная насадка

Насадка-зубная щетка

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электротехнических изделий, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Опасность.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.

Не погружайте и не роняйте зарядное устройство в воду или другие жидкости.

Перед первым использованием и в течение всего срока службы проверяйте шнур зарядного устройства на наличие повреждений.

Используйте устройство только в соответствии с данной инструкцией или рекомендациями стоматолога.

Не роняйте устройство и не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.

Держите зарядное устройство и шнур вдали от нагретых поверхностей.

Не используйте устройство на открытом воздухе и в местах, где используются аэрозоли (спреи) или подается кислород.

Не используйте йод, солевой раствор или концентрированные эфирные масла, нерастворимые в воде. Это может снизить производительность устройства и сократить срок его службы. Использование таких веществ может привести к аннулированию гарантии.

Наполняйте резервуар только водой или раствором, рекомендованным стоматологами.

Перед использованием устройства снимите все украшения из полости рта.

Не используйте устройство, если у вас есть открытые раны на языке или во рту.

Обслуживание

Обязательно вылейте воду из бака и дайте прибору поработать 2-3 секунды, чтобы слить остатки воды после использования. В противном случае в оставшейся воде могут скапливаться бактерии. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость. При необходимости протрите его снаружи мягкой тканью и мягким неабразивным моющим средством. Резервуар можно вымыть водой с мылом. Удалите грязь изнутри с помощью щетки или аналогичного средства и тщательно высушите, если резервуар не используется в течение длительного времени.

Уход за батареей и её утилизация

В устройстве установлена литиевая батарея. По истечении срока службы батареи, пожалуйста, утилизируйте устройство в ближайшем центре переработки в соответствии с местными требованиями. Батарея не подлежит замене.


Гарантия

При любых вопросах или неисправностях обращайтесь к продавцу при наличии гарантийного талона. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, нормальным износом или незначительными дефектами, не влияющими на стоимость или работу прибора. Гарантия аннулируется, если ремонт производится неуполномоченными лицами или если используются неоригинальные запчасти.

Примечание: Чрезмерное нагревание может привести к остановке прибора во время работы. Выключите устройство, охладите его в течение 2 часов и снова включите.

<https://www.sulpak.kz>

ARG

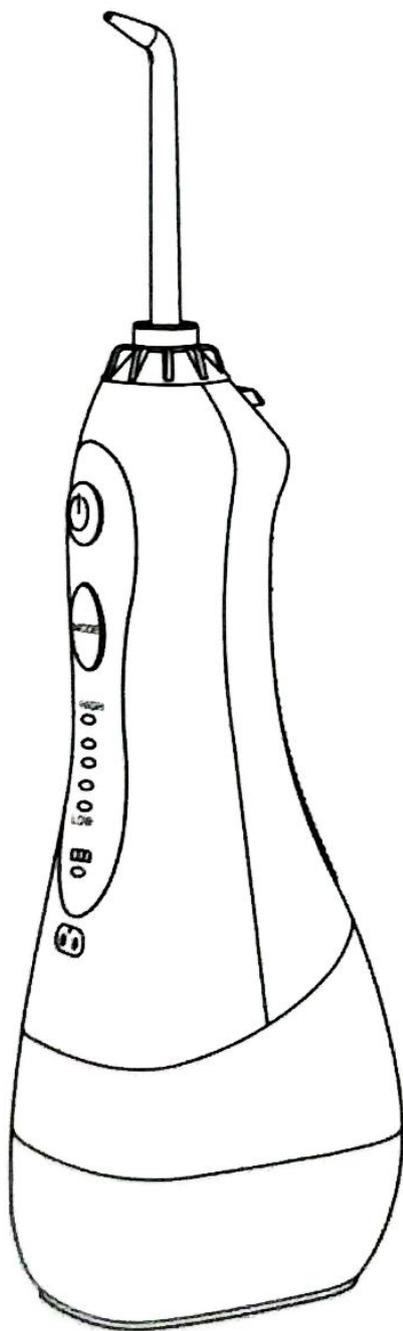


Портативті суарғыш

HF-6

Сізге Портативті суарғыш ARG HF-6 сатып алғаныңыз үшін рахмет. Пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Кез келген көмек қажет болса, бізге хабарласыңыз.

Үлгі	HF-6	Енгізу	5V 1A
Материал	ABS, PC	Су қысымының диапазоны	40-110 psi
Зарядтау уақыты	3-5 сағат	водонепроницаемости	IPX7
Резервуардың сыйымдылығы	300ML	Сумен жабдықтау әдісі	Пульсирленген су

Схема

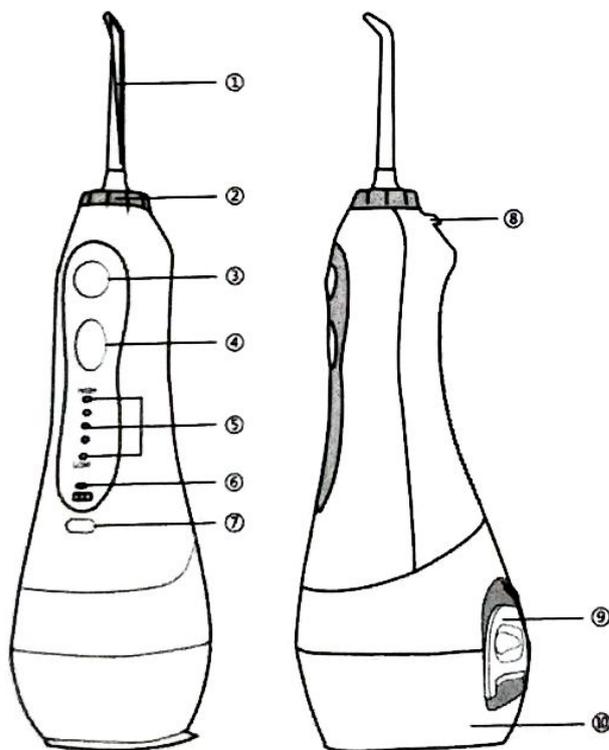

- 1.Саптама
- 2.Саптаманы бұру реттегіші
- 3.Қосу/өшіру түймесі
- 4.Режимді таңдау түймесі
- 5.Режим индикаторлары
- 6.Қуаттау индикаторы
- 7.Қуаттау порты
- 8.Саптаманы алу түймесі
- 9.Су резервуарының қақпағы
- 10.Су резервуары

Аксессуарлар



USB зарядтау кабелі



Тіл тазалағыш



Ортодонтиялық саптама



Пародонтиялық саптама



Стандартты саптама



Мұрынға арналған саптама



Тіс щеткасы саптамасы

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр құрылғыларын, әсіресе балалардың қатысуымен пайдаланған кезде, келесі негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет:

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ.

Қауіп.

Электр тогының соғу қаупін азайту үшін:

Зарядтау құрылғысын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

Зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз және түсірмеңіз.

Өнімді алғаш қолданар алдында және бүкіл қызмет ету мерзімі бойы зарядтау сымын зақымдануға тексеріңіз.

Бұл құрылғыны тек осы нұсқауларға немесе тіс дәрігеріңіздің ұсыныстарына сәйкес пайдаланыңыз.

Құрылғыны түсірмеңіз және саңылауларына бөгде заттарды енгізбеңіз.

Зарядтау құрылғысы мен сымды қызған беттерден алыс ұстаңыз.

Бұл құрылғыны ашық ауада қолданбаңыз және аэрозоль (спрей) немесе оттегі беру кезінде пайдаланбаңыз.

Йод, тұзды ерітінді (физиологиялық ерітінді) немесе суда ерімейтін концентрленген эфир майларын пайдаланбаңыз. Олар өнімнің өнімділігін төмендетуі және оның қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін. Бұл өнімдерді пайдалану кепілдікті жоя алады. Резервуарды тек сумен немесе кәсіби стоматологтар ұсынған басқа ерітіндімен толтырыңыз.

Бұл құрылғыны қолданбас бұрын ауыз қуысы әшекейлерін алып тастаңыз.

Тілде немесе ауызда ашық жара болса, пайдаланбаңыз.

Қолдау

Суды бактан міндетті түрде төгіп, құрылғыны 2-3 секундқа қосып қойыңыз. қалған суды толығымен шығару үшін. Әйтпесе, қалған суда бактериялар жиналуы мүмкін. Құрылғыны суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Қажет болған жағдайда, сыртқы бетін жұмсақ шүберекпен және абразивті емес жуғыш затпен сүртіңіз. Резервуарды сабынды сумен жууға болады. Егер резервуар ұзақ уақыт пайдаланылмаса, ішкі кірді щеткамен тазалап, толық құрғатыңыз.

Батареяны күту және жою

Құрылғыда литий батареясы орнатылған. Батареяның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, оны жергілікті ережелерге сәйкес ең жақын қайта өңдеу орталығында утилизациялаңыз. Батарея ауыстыруға келмейді.

Кепілдік

Кез келген сұрақтар немесе ақаулар туындаған жағдайда, кепілдік талоныңыз болған жағдайда сатушыға хабарласыңыз. Бұл кепілдік дұрыс пайдаланбау, табиғи тозу немесе құрылғының құнын немесе жұмысын айтарлықтай бұзбайтын ұсақ ақаулар үшін қолданылмайды. Егер жөндеу рұқсат етілмеген адамдармен жүргізілсе немесе түпнұсқа емес бөлшектер пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болады.

Ескерту:

Құрылғының қатты қызуы жұмыс кезінде оның тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны өшіріп, 2 сағат суытып, қайта қосыңыз.

<https://www.sulpak.kz>